

Título del TFM

Nombre del autor

July 8, 2026

Contents

1	Operación básica	2
1.1	Pantallas y configuraciones	2
1.1.1	Main screen	2
1.1.2	Jog screen	3
1.1.3	Profile screen	4
1.1.4	Optical alignment screen	5
2	Clases de la API	9
2.1	Clase System	9
2.2	Clase AxisComponents	10
2.3	Clase Axis2D	11
2.4	Clase Axis3D	12
2.5	Clase Alignment	14
2.6	Clase Profile	17
2.7	Clase Angle Asjustment	18
A	Instalación TwinCAT XAE eXtended Automation Engineering	20
B	Documentacion de la API Suruga Seiki	26
B.1	Clase Alignment	26
B.2	Clase AngleAdjustment	33
B.3	Clase Axis2D	34
B.4	Clase Axis3D	35
B.5	Clase AxisComponents	36
B.6	Clase ErrorLog	36
B.7	Clase IO	37
B.8	Clase PowerMeter	37
B.9	Clase System	38

Chapter 1

Operación básica

1.1 Pantallas y configuraciones

1.1.1 Main screen

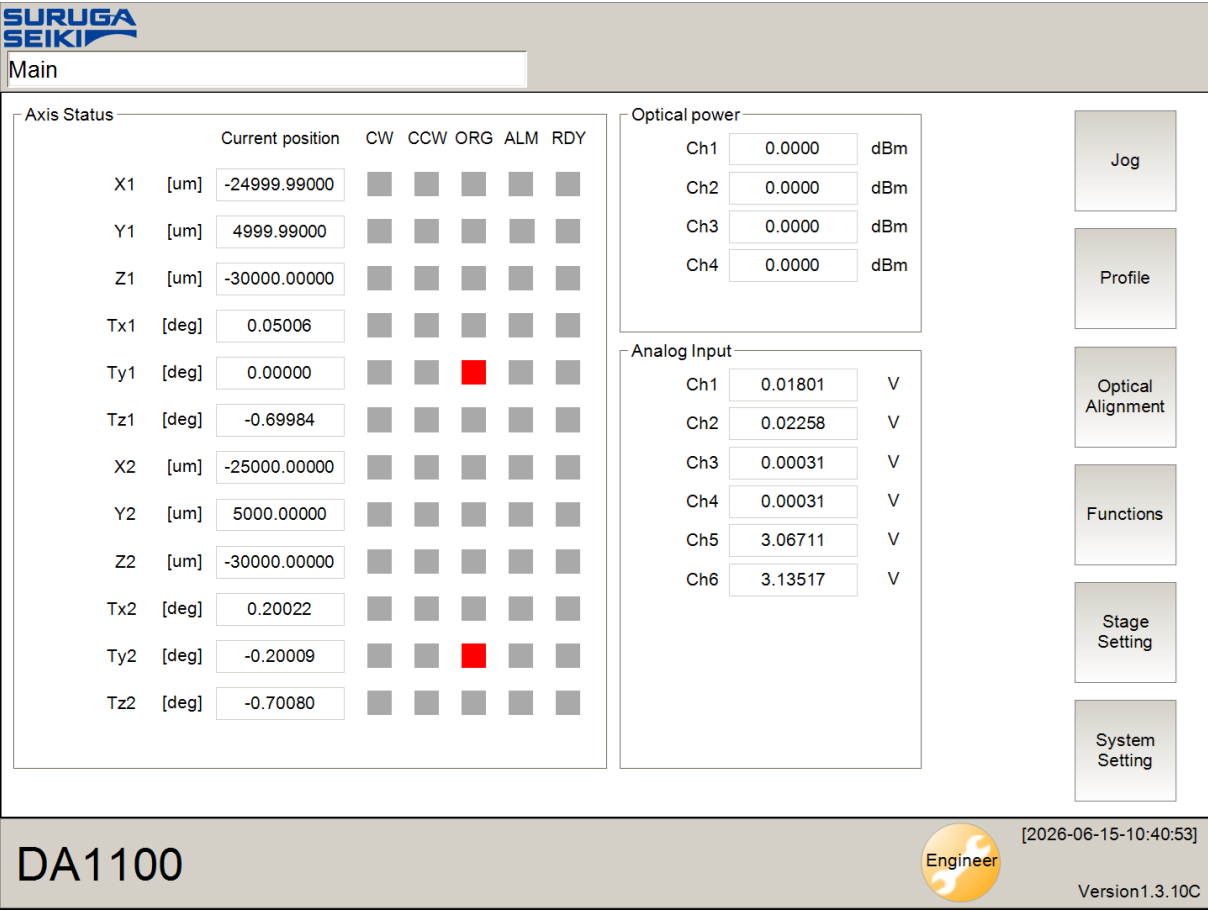


Figure 1.1: Pendiente.

Stage axis jog control

Optical power

Ch1

0.0000

dBm

Ch2

0.0000

dBm

Analog

Ch1

0.01923

V

Ch2

0.02197

V

Servo

Error Reset

Mode

Jog

Inching

Target

Velocity

High

Mid.

Low

Stop

Save

X1 [um] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 1.00000 Current position -24999.99000 Speed 10.00000 CW CCW ORG ALM ORG	X2 [um] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 1.00000 Current position -25000.00000 Speed 10.00000 CW CCW ORG ALM ORG
Y1 [um] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 10.00000 Current position 4999.99000 Speed 10.00000 CW CCW ORG ALM ORG	Y2 [um] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 1.00000 Current position 5000.00000 Speed 10.00000 CW CCW ORG ALM ORG
Z1 [um] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 5.00000 Current position -30000.00000 Speed 10.00000 CW CCW ORG ALM ORG	Z2 [um] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 10.00000 Current position -30000.00000 Speed 10.00000 CW CCW ORG ALM ORG
Tx1 [deg] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 0.00000 Current position 0.05006 Speed 0.10000 CW CCW ORG ALM ORG	Tx2 [deg] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 0.00000 Current position 0.20022 Speed 0.10000 CW CCW ORG ALM ORG
Ty1 [deg] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 5.00000 Current position 0.00000 Speed 0.10000 CW CCW ORG ALM ORG	Ty2 [deg] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 0.00000 Current position -0.20009 Speed 0.10000 CW CCW ORG ALM ORG
Tz1 [deg] - + Go Target position -2.50000 Inching distance 0.20000 Current position -0.69984 Speed 0.10000 CW CCW ORG ALM ORG	Tz2 [deg] - + Go Target position 0.00000 Inching distance 0.00000 Current position -0.70080 Speed 0.10000 CW CCW ORG ALM ORG

DA1100

[2026-06-15-10:41:19]

Version1.3.10C

3

1.1.3 Profile screen



Figure 1.3: Pendiente.

1.1.4 Optical alignment screen

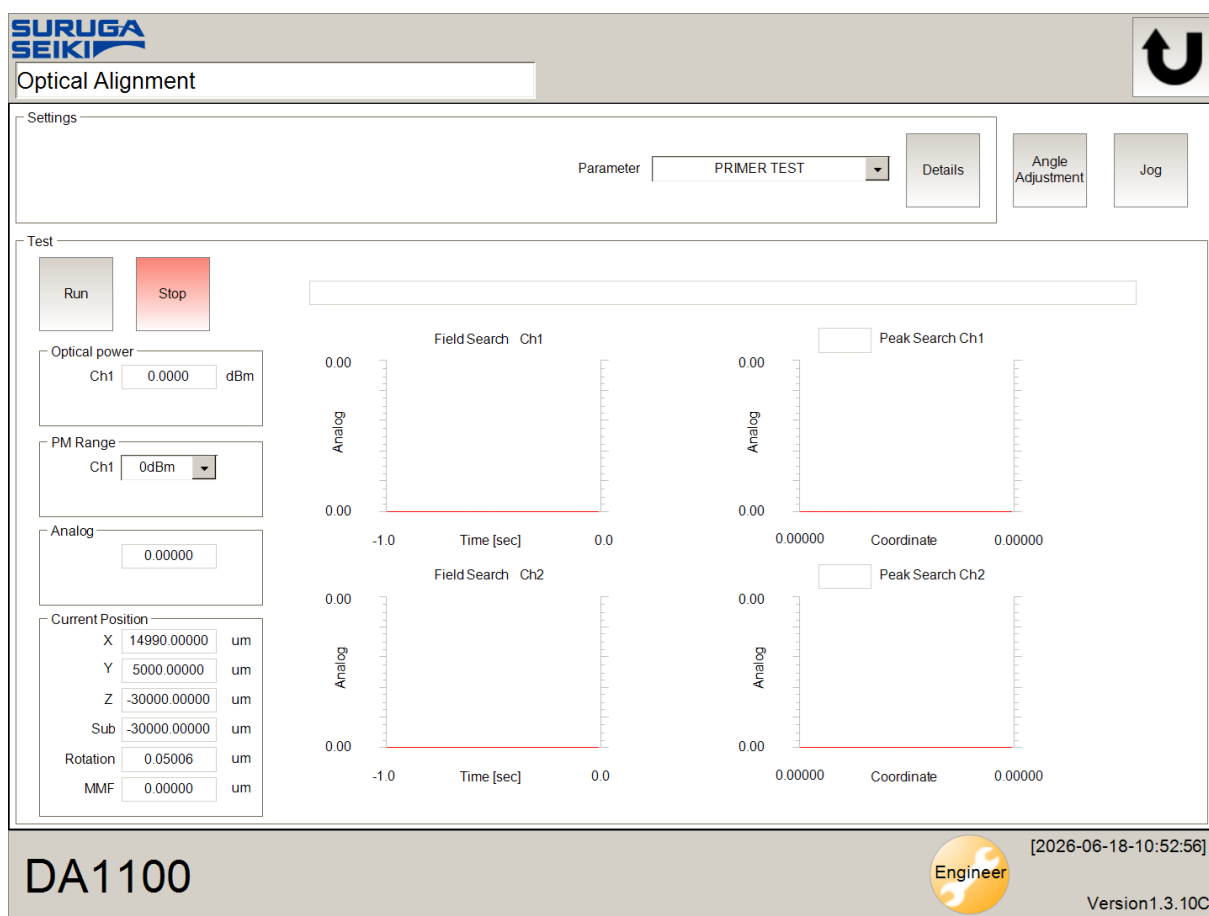


Figure 1.4: Pendiente.

El usuario puede llevar a cabo los siguientes métodos de alineamiento:

- **Alineamiento Single (Single Alignment):** Realiza el alineamiento utilizando un único eje.
- **Alineamiento Flat (Flat Alignment):** Realiza el alineamiento en un plano utilizando dos ejes.
- **Alineamiento Focus (Focus Alignment):** Además del alineamiento Flat, realiza el ajuste sobre el eje óptico empleando tres ejes.
- **Alineamiento por rotación de dos canales (2ch Rotation Alignment):** Realiza un alineamiento Flat utilizando dos señales ópticas y corrige el ángulo alrededor del eje óptico en función de la posición y de la distancia configurada.
- **Alineamiento MMF (MMF Rotation Alignment):** Posiciona una fibra multimodo (MMF, Multi-Mode Fiber) en el lado de salida y corrige la posición y el ángulo del arreglo de fibras en el lado de entrada.

Alineamiento Flat (Flat Alignment):

SURUGA SEIKI

Optical Alignment

Alignment Mode: Flat

Main Axis: X: X2, Y: Y2

XY Sub Axis: None

Sub Angle [deg]: X: 0.00000, Y: 0.00000

Parameter: OPTICAL RIGHT

Name: OPTICAL RIGHT

Save

Threshold XY

Ch1

Field Search [V]: 0.20000

Peak Search [%]: 25.00

Search

X Y

Search Range: 50.00000 20.00000

Field Search Pitch: 0.50000 0.50000

Field Search First Pitch: 0.00000

Field Search Speed: 200.00000 200.00000

Peak Search Speed: 200.00000 200.00000

Smoothing Range [ms]: 40 40

Centroid Threshold [%]: 0.00 0.00

Judge

X Y

Convergent Range: 0.50000 0.50000

Comparison Count: 2

Max Repeat Count: 10

Sensor

Ch1

PM: Ch1

Analog: Ch1

Auto Range Up: True

Initial Range Setting: True

Initial Range: Ch1 -40dBm

Wave Length: 1550.00

DA1100

Engineer [2026-06-29-09:43:30]

Version 1.3.10C

Figure 1.5: Pendiente.

Se parte de la condición en la que la fibra y el Device Under Test (DUT) se encuentran desalineados, por lo que el sistema desconoce la ubicación del punto de máxima potencia óptica. Debido a ello, no es posible iniciar directamente un Peak Search, ya que este requiere partir de una señal detectable para localizar el máximo.

Como primer paso, el algoritmo ejecuta un Field Search, cuyo objetivo es explorar el área alrededor de la posición inicial hasta encontrar una potencia lo suficientemente grande. La condición que determina el éxito de esta etapa es:

$$P_{OPM} > \text{FieldSearchThreshold} \quad (1.1)$$

Donde FieldSearchThreshold corresponde al nivel mínimo de potencia, expresada en voltios haciendo uso de la salida analógica del OPM, que indica que el sistema ha encontrado una señal válida.

Durante esta etapa, el movimiento sigue una trayectoria en espiral cuadrada que se expande progresivamente alrededor del punto inicial. En cuanto la potencia medida supera el umbral establecido, el algoritmo abandona el Field Search e inicia el proceso de Peak Search, encargado de localizar con precisión el punto de máxima potencia.

Si la trayectoria alcanza los límites definidos por SearchRangeX o SearchRangeY sin encontrar una señal superior a FieldSearchThreshold, el proceso finaliza con el estado FieldSearchRangeOver,

indicando que no fue posible localizar una señal dentro del área de búsqueda especificada.

El comportamiento del algoritmo empleado para un alineamiento tipo flat está determinado por un conjunto de parámetros que definen el área de búsqueda, la resolución del barrido y el criterio para iniciar la búsqueda fina. En la Tabla 1.1 se describen los parámetros más relevantes en conjunto con su equivalente en el DLL provisto por Suruga Seiki.

Table 1.1: Parámetros de configuración

Parámetro	Descripción	Tipo .NET
Alignment		
mainStageNumberX	Número del eje principal utilizado para el movimiento en X.	UInt16
mainStageNumberY	Número del eje principal utilizado para el movimiento en Y.	UInt16
subStageNumberXY	Número del sub-eje utilizado para el movimiento en XY.	UInt16
subAngleX	Ángulo del sub-eje para la alineación en X.	Double
subAngleY	Ángulo del sub-eje para la alineación en Y.	Double
Sensor		
pmCh	Canal del medidor de potencia utilizado durante la alineación.	UInt16
analogCh	Canal de entrada analógica utilizado para la medición.	UInt16
pmAutoRangeUpOn	Habilita el incremento automático del rango del medidor de potencia.	Boolean
pmInitRangeSettingOn	Habilita el uso de un rango inicial para el medidor de potencia.	Boolean
pmInitRange	Valor del rango inicial del medidor de potencia.	Int16
Threshold		
fieldSearchThreshold	Umbral utilizado durante la búsqueda de campo.	Double
peakSearchThreshold	Umbral utilizado durante la búsqueda del pico de señal.	Double
Search		
searchRangeX	Rango de búsqueda en la dirección X.	Double
searchRangeY	Rango de búsqueda en la dirección Y.	Double
fieldSearchPitchX	Paso de exploración en X durante la búsqueda de campo.	Double
fieldSearchPitchY	Paso de exploración en Y durante la búsqueda de campo.	Double
fieldSearchFirstPitchX	Primer paso de exploración en X durante la búsqueda de campo.	Double
fieldSearchSpeedX	Velocidad de exploración en X durante la búsqueda de campo.	Double

Continued on next page

Table 1.1: Parámetros de configuración (Continued)

fieldSearchSpeedY	Velocidad de exploración en Y durante la búsqueda de campo.	Double
peakSearchSpeedX	Velocidad de búsqueda del pico en X.	Double
peakSearchSpeedY	Velocidad de búsqueda del pico en Y.	Double
smoothingRangeX	Ventana de suavizado aplicada a los datos en X.	UInt32
smoothingRangeY	Ventana de suavizado aplicada a los datos en Y.	UInt32
centroidThresholdX	Umbral para el cálculo del centroide en X.	Double
centroidThresholdY	Umbral para el cálculo del centroide en Y.	Double
Judge		
convergentRangeX	Rango de convergencia permitido en X.	Double
convergentRangeY	Rango de convergencia permitido en Y.	Double
comparisonCount	Número de comparaciones realizadas para verificar la convergencia.	UInt16
maxRepeatCount	Número máximo de repeticiones permitidas durante el proceso de alineación.	UInt16

Chapter 2

Clases de la API

2.1 Clase System

La clase **System** constituye el punto de acceso principal a las funciones globales del controlador Suruga Seiki. A través de esta clase es posible consultar las capacidades del sistema, verificar el estado de la comunicación con el controlador, obtener información sobre la versión del software y gestionar operaciones generales relacionadas con la conexión y el diagnóstico del equipo.

La Tabla 2.1 resume los principales miembros públicos de la clase, agrupados en propiedades, métodos, campos y tipos anidados. Para cada elemento se indica su propósito, el tipo de dato asociado y el nivel de acceso proporcionado por la API.

Table 2.1: Miembros de la clase **System**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Propiedades			
MaxAxisStageNumber	Número máximo de ejes de posicionamiento soportados por el sistema.	UInt16	get/set
MaxAnalogInputChNumber	Número máximo de canales de entrada analógica disponibles.	UInt16	get/set
MaxAlignmentNumber	Número máximo de instancias de alineación soportadas por el sistema.	UInt16	get/set
MaxAngleAdjustmentNumber	Número máximo de módulos de ajuste angular soportados.	UInt16	get/set
MaxDInChNumber	Número máximo de canales de entrada digital disponibles.	UInt16	get/set
MaxDOutChNumber	Número máximo de canales de salida digital disponibles.	UInt16	get/set
MaxAnalogOutputChNumber	Número máximo de canales de salida analógica disponibles.	UInt16	get/set
MaxPowerMeterChNumber	Número máximo de canales del medidor de potencia soportados.	UInt16	get/set
Instance	Instancia única (Singleton) de la clase System .	System	get
Connected	Indica si existe una conexión activa con el controlador.	Boolean	get
DllVersion	Versión de la biblioteca dinámica (DLL) utilizada por la API.	String	get

Continued on next page

Table 2.1: Miembros de la clase **System** (Continued)

SystemVersion	Versión del firmware o software del sistema de control.	String	get
Métodos			
IsError()	Determina si el sistema presenta algún estado de error.	Boolean	–
GetCurrentErrorCode()	Obtiene el código del error actual del sistema.	ErrorCode	–
IsEmergencyAsserted()	Indica si la condición de parada de emergencia está activada.	Boolean	–
SetAddress(String addr)	Establece la dirección del controlador utilizada para la comunicación.	Void	–
DisconnectAds()	Finaliza la conexión ADS con el controlador.	Void	–
Campos			
MaxProfileNumber	Número máximo de perfiles soportados por el sistema.	UInt16	static
ProfileDataPacketMaxDataNumber	Número máximo de datos que puede contener un paquete de datos de perfil.	UInt32	static
Tipos anidados / Enums			
ErrorCode	Enumeración que define los posibles códigos de error devueltos por la clase System .	Enum	–

2.2 Clase AxisComponents

Table 2.2: Miembros de la clase **AxisComponents**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Constructores			
AxisComponents(UInt16 axisNumber)	Inicializa una nueva instancia de la clase asociada al eje especificado.	Constructor	–
Métodos			
MoveAbsolute(Double position)	Desplaza el eje hasta una posición absoluta.	ErrorCode	–
MoveRelative(Double distance)	Desplaza el eje una distancia relativa respecto a su posición actual.	ErrorCode	–
ReturnOrigin()	Ejecuta el procedimiento de retorno al origen del eje.	ErrorCode	–
Stop()	Detiene inmediatamente el movimiento del eje.	ErrorCode	–
TurnOnServo()	Activa el servomotor del eje.	ErrorCode	–
TurnOffServo()	Desactiva el servomotor del eje.	ErrorCode	–
ResetError()	Restablece el estado de error del eje.	ErrorCode	–
GetTargetPosition()	Obtiene la posición objetivo configurada para el eje.	Double	–
GetActualPosition()	Obtiene la posición actual del eje.	Double	–
IsServoOn()	Indica si el servomotor se encuentra activado.	Boolean	–
IsServoAlarm()	Indica si el servomotor presenta una condición de alarma.	Boolean	–

Continued on next page

Table 2.2: Miembros de la clase **AxisComponents** (Continued)

IsMoving()	Indica si el eje se encuentra en movimiento.	Boolean	–
IsOriginSignalOn()	Indica si la señal del sensor de origen está activa.	Boolean	–
IsCwLimitSignalOn()	Indica si el interruptor de límite en sentido horario (CW) está activo.	Boolean	–
IsCcwLimitSignalOn()	Indica si el interruptor de límite en sentido antihorario (CCW) está activo.	Boolean	–
IsCwTorqueLimitOn()	Indica si se ha alcanzado el límite de par en sentido horario.	Boolean	–
IsCcwTorqueLimitOn()	Indica si se ha alcanzado el límite de par en sentido antihorario.	Boolean	–
IsOriginReturnSucceeded()	Indica si el procedimiento de retorno al origen finalizó correctamente.	Boolean	–
SetAccelRate(Double rate)	Configura la tasa de aceleración del eje.	ErrorCode	–
SetDecelRate(Double rate)	Configura la tasa de desaceleración del eje.	ErrorCode	–
SetSineMotion(Boolean sineMotion)	Habilita o deshabilita el modo de movimiento senoidal.	ErrorCode	–
SetFulcrumSpan(Double span)	Configura la distancia del brazo o fulcro utilizada durante el movimiento.	ErrorCode	–
SetEncoderStepLength(Double length)	Configura la longitud correspondiente a un paso del codificador.	ErrorCode	–
SetMaxSpeed(Double speed)	Establece la velocidad máxima permitida para el eje.	ErrorCode	–
SetCWTorqueLimit(Double cWlimit)	Configura el límite de par en sentido horario (CW).	ErrorCode	–
SetCCWTorqueLimit(Double cCWlimit)	Configura el límite de par en sentido antihorario (CCW).	ErrorCode	–
GetErrorCode()	Obtiene el código de error actual del eje.	ErrorCode	–
GetStatus()	Obtiene el estado actual del eje.	Status	–
Tipos anidados / Enums			
ErrorCode	Enumeración que define los posibles códigos de error devueltos por la clase AxisComponents .	Enum	–
Status	Enumeración que representa los distintos estados de funcionamiento del eje.	Enum	–

2.3 Clase Axis2D

Table 2.3: Miembros de la clase **Axis2D**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Constructores			
Axis2D(UInt16 mainStageNumber, UInt16 subStageNumber)	Inicializa una nueva instancia de la clase asociada a un sistema de posicionamiento bidimensional compuesto por dos ejes.	Constructor	–
Métodos			
SetAxisNumber(UInt16 mainStageNumber, UInt16 subStageNumber)	Asigna los identificadores de los ejes principal y secundario utilizados por el sistema bidimensional.	ErrorCode	–

Continued on next page

Table 2.3: Miembros de la clase **Axis2D** (Continued)

GetAxisNumber()	Obtiene los identificadores de los ejes asociados al sistema bidimensional.	UInt16[]	–
MoveAbsolute(Point targetPosition)	Desplaza ambos ejes hasta una posición absoluta especificada mediante una estructura de coordenadas.	ErrorCode	–
MoveAbsolute(Double mainTargetPosition, Double subTargetPosition)	Desplaza ambos ejes hasta las posiciones absolutas indicadas para cada eje.	ErrorCode	–
MoveRelative(Point targetDistance)	Realiza un desplazamiento relativo de ambos ejes utilizando una estructura de coordenadas.	ErrorCode	–
MoveRelative(Double mainDistance, Double subDistance)	Realiza un desplazamiento relativo independiente para cada eje.	ErrorCode	–
MoveAbsoluteAngle(Double mainTargetPosition, Double subAngle)	Desplaza el eje principal a una posición absoluta mientras posiciona el eje secundario según un ángulo especificado.	ErrorCode	–
MoveRelativeAngle(Double mainDistance, Double subAngle)	Realiza un desplazamiento relativo del eje principal y posiciona el eje secundario mediante un ángulo especificado.	ErrorCode	–
Stop()	Detiene el movimiento de ambos ejes.	ErrorCode	–
GetTargetPosition()	Obtiene la posición objetivo del sistema bidimensional.	Point	–
GetActualPosition()	Obtiene la posición actual del sistema bidimensional.	Point	–
IsMoving()	Indica si alguno de los ejes se encuentra en movimiento.	Boolean	–
SetSpeed(Double speed)	Configura la velocidad de desplazamiento del sistema bidimensional.	ErrorCode	–
SetAccelRate(Double rate)	Configura la tasa de aceleración del movimiento.	ErrorCode	–
SetDecelRate(Double rate)	Configura la tasa de desaceleración del movimiento.	ErrorCode	–
GetErrorCode()	Obtiene el código de error actual del sistema bidimensional.	ErrorCode	–
GetStatus()	Obtiene el estado actual del sistema bidimensional.	Status	–
Tipos anidados / Enums			
Point	Estructura que representa una posición bidimensional mediante las coordenadas de los ejes principal y secundario.	Struct	–

2.4 Clase Axis3D

Table 2.4: Miembros de la clase **Axis3D**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Constructores			

Continued on next page

Table 2.4: Miembros de la clase **Axis3D** (Continued)

Axis3D(UInt16 mainStageNumberX, UInt16 mainStageNumberY, UInt16 mainStageNumberZ)	Inicializa una nueva instancia de la clase asociada a un sistema de posicionamiento tridimensional compuesto por tres ejes.	Constructor	–
Métodos			
SetAxisNumber(UInt16 mainStageNumberX, UInt16 mainStageNumberY, UInt16 mainStageNumberZ)	Asigna los identificadores de los ejes utilizados por el sistema tridimensional.	ErrorCode	–
GetAxisNumber()	Obtiene los identificadores de los ejes asociados al sistema tridimensional.	UInt16[]	–
MoveAbsolute(Point3D targetPosition)	Desplaza el sistema tridimensional hasta una posición absoluta especificada mediante una estructura de coordenadas.	ErrorCode	–
MoveAbsolute(Double targetPositionX, Double targetPositionY, Double targetPositionZ)	Desplaza el sistema tridimensional hasta las posiciones absolutas indicadas para cada eje.	ErrorCode	–
MoveAbsolute(Point3D targetPosition, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)	Desplaza el sistema tridimensional hasta una posición absoluta activando una salida digital durante el movimiento según los tiempos especificados.	ErrorCode	–
MoveAbsolute(Double targetPositionX, Double targetPositionY, Double targetPositionZ, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)	Desplaza el sistema tridimensional hasta las posiciones absolutas indicadas para cada eje activando una salida digital durante el movimiento.	ErrorCode	–
MoveRelative(Point3D targetDistance)	Realiza un desplazamiento relativo del sistema tridimensional utilizando una estructura de coordenadas.	ErrorCode	–
MoveRelative(Double targetDistanceX, Double targetDistanceY, Double targetDistanceZ)	Realiza un desplazamiento relativo independiente para cada eje.	ErrorCode	–
MoveRelative(Point3D targetDistance, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)	Realiza un desplazamiento relativo activando una salida digital durante el movimiento según los tiempos especificados.	ErrorCode	–
MoveRelative(Double targetDistanceX, Double targetDistanceY, Double targetDistanceZ, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)	Realiza un desplazamiento relativo independiente para cada eje activando una salida digital durante el movimiento.	ErrorCode	–
Stop()	Detiene el movimiento de los tres ejes.	ErrorCode	–
GetTargetPosition()	Obtiene la posición objetivo del sistema tridimensional.	Point3D	–
GetActualPosition()	Obtiene la posición actual del sistema tridimensional.	Point3D	–
IsMoving()	Indica si alguno de los ejes se encuentra en movimiento.	Boolean	–

Continued on next page

Table 2.4: Miembros de la clase **Axis3D** (Continued)

SetSpeed(Double speed)	Configura la velocidad de desplazamiento del sistema tridimensional.	ErrorCode	–
SetAccelRate(Double accelRate)	Configura la tasa de aceleración del movimiento.	ErrorCode	–
SetDecelRate(Double decelRate)	Configura la tasa de desaceleración del movimiento.	ErrorCode	–
SetStageNumber(UInt16 mainStageNumberX, UInt16 mainStageNumberY, UInt16 mainStageNumberZ)	Configura los identificadores de los ejes principales utilizados por el sistema.	ErrorCode	–
SetSubStageNumber(UInt16 subStageNumberX, UInt16 subStageNumberY, UInt16 subStageNumberZ)	Configura los identificadores de los ejes secundarios utilizados por el sistema.	ErrorCode	–
SetRotationCenter(Double rotationOffsetX, Double rotationOffsetY, Double rotationOffsetZ)	Define el centro de rotación del sistema mediante los desplazamientos especificados para los ejes X, Y y Z.	ErrorCode	–
GetErrorCode()	Obtiene el código de error actual del sistema tridimensional.	ErrorCode	–
GetStatus()	Obtiene el estado actual del sistema tridimensional.	Status	–
Tipos anidados / Estructuras			
Point3D	Estructura que representa una posición tridimensional mediante las coordenadas X, Y y Z.	Struct	–
RotationCenter	Estructura que define los ejes y desplazamientos utilizados como centro de rotación del sistema.	Struct	–

2.5 Clase Alignment

Table 2.5: Miembros de la clase **Alignment**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Constructores			
Alignment()	Inicializa una nueva instancia de la clase Alignment .	Constructor	–
Alignment(UInt16 id)	Inicializa una nueva instancia de la clase asociada al identificador de alineación especificado.	Constructor	–
Métodos			
StartSingle()	Inicia el procedimiento de alineación de tipo <i>Single</i> .	ErrorCode	–
StartFlat()	Inicia el procedimiento de alineación de tipo <i>Flat</i> .	ErrorCode	–
StartFocus()	Inicia el procedimiento de alineación de tipo <i>Focus</i> .	ErrorCode	–
StartTwoChRotation()	Inicia el procedimiento de alineación por rotación de dos canales.	ErrorCode	–

Continued on next page

Table 2.5: Miembros de la clase **Alignment** (Continued)

StartMMFRotation()	Inicia el procedimiento de alineación por rotación para fibra multimodo (MMF).	ErrorCode	–
StartLoopBack()	Inicia el procedimiento de alineación de tipo <i>LoopBack</i> .	ErrorCode	–
StartCommon()	Inicia un procedimiento de alineación utilizando parámetros comunes.	ErrorCode	–
Stop()	Detiene el procedimiento de alineación en ejecución.	ErrorCode	–
GetErrorCode()	Obtiene el código de error actual del proceso de alineación.	ErrorCode	–
GetStatus()	Obtiene el estado actual del proceso de alineación.	Status	–
GetErrorAxisID()	Obtiene el identificador del eje responsable del error actual.	UInt32	–
GetAligningStatus()	Obtiene el estado detallado del procedimiento de alineación.	StatusCode	–
GetProfilePacketSumIndex (ProfileDataType profileDataType)	Obtiene el número total de paquetes de datos disponibles para el perfil especificado.	UInt32	–
RequestProfileData(ProfileDataType profileDataType, UInt32 index)	Solicita un paquete de datos correspondiente al perfil y al índice especificados.	ProfileData	–
RequestProfileData(ProfileDataType profileDataType, UInt32 index, Boolean isRotationCenterShift)	Solicita un paquete de datos del perfil considerando el desplazamiento del centro de rotación.	ProfileData	–
GetVoltage(UInt32 alignmentAInCh)	Obtiene el valor de tensión medido en el canal de entrada analógica especificado.	Double	–
GetPower(UInt32 alignmentPMCh)	Obtiene la potencia óptica medida por el canal del medidor de potencia especificado.	Double	–
GetMeasurementWaveLength(UInt32 alignmentPMCh)	Obtiene la longitud de onda configurada para el canal del medidor de potencia especificado.	Double	–
SetSingle(ISingleParameter parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación <i>Single</i> .	ErrorCode	–
SetSingle(ISingleParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento <i>Single</i> utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetFlat(IFlatParameter parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación <i>Flat</i> .	ErrorCode	–
SetFlat(IFlatParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento <i>Flat</i> utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetFocus(IFocusParameter parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación <i>Focus</i> .	ErrorCode	–
SetFocus(IFocusParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento <i>Focus</i> utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetTwoChRotation(ITwoChRotation parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación por rotación de dos canales.	ErrorCode	–
SetTwoChRotation(ITwoChRotation parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento de rotación de dos canales utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–

Continued on next page

Table 2.5: Miembros de la clase **Alignment** (Continued)

SetMMFRotation(IMMFRotation parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación por rotación para fibra multimodo.	ErrorCode	–
SetMMFRotation(IMMFRotation parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento de rotación para fibra multimodo utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetLoopBack(ILoopBackParameter parameter)	Configura los parámetros del procedimiento de alineación <i>LoopBack</i> .	ErrorCode	–
SetLoopBack(ILoopBackParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento <i>LoopBack</i> utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetCommon(CommonParameter parameter)	Configura los parámetros comunes del procedimiento de alineación.	ErrorCode	–
SetCommon(CommonParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros comunes utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
SetMeasurementWaveLength(UInt32 alignmentPMCh, Double waveLength)	Configura la longitud de onda de medición para el canal del medidor de potencia especificado.	ErrorCode	–
Tipos anidados			
AlignmentType	Enumeración que define los distintos tipos de procedimientos de alineación soportados.	Enum	–
ErrorCode	Enumeración que define los posibles códigos de error del proceso de alineación.	Enum	–
Status	Enumeración que representa los estados posibles del procedimiento de alineación.	Enum	–
AligningStatusCode	Enumeración que describe el estado interno del algoritmo de alineación.	Enum	–
ProfileDataType	Enumeración que identifica los diferentes tipos de perfiles generados durante la alineación.	Enum	–
ZMode	Enumeración que define el modo de búsqueda utilizado sobre el eje Z.	Enum	–
ISharingParameter	Interfaz que define los parámetros compartidos entre distintos procedimientos de alineación.	Interface	–
ISingleParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento <i>Single</i> .	Interface	–
SingleParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento <i>Single</i> .	Class	–
IFlatParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento <i>Flat</i> .	Interface	–
FlatParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento <i>Flat</i> .	Class	–
IFocusParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento <i>Focus</i> .	Interface	–
FocusParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento <i>Focus</i> .	Class	–
ITwoChRotationParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento de rotación de dos canales.	Interface	–

Continued on next page

Table 2.5: Miembros de la clase **Alignment** (Continued)

TwoChRotationParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento de rotación de dos canales.	Class	–
IMMFRotationParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento de rotación para fibra multimodo.	Interface	–
MMFRotationParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento de rotación para fibra multimodo.	Class	–
ILoopBackParameter	Interfaz que define los parámetros del procedimiento <i>LoopBack</i> .	Interface	–
LoopBackParameter	Clase que implementa los parámetros del procedimiento <i>LoopBack</i> .	Class	–
ICommonParameter	Interfaz que define los parámetros comunes de los procedimientos de alineación.	Interface	–
CommonParameter	Clase que implementa los parámetros comunes de alineación.	Class	–
ProfileData	Clase que almacena los datos de perfil obtenidos durante un procedimiento de alineación.	Class	–

2.6 Clase Profile

Table 2.6: Miembros de la clase **Profile**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Constructores			
Profile()	Inicializa una nueva instancia de la clase Profile .	Constructor	–
Métodos			
Start()	Inicia el proceso de adquisición de datos de perfil.	ErrorCode	–
Stop()	Detiene el proceso de adquisición de datos de perfil.	ErrorCode	–
GetProfileStatus()	Obtiene el estado actual del proceso de adquisición del perfil.	Status	–
GetProfilePacketSumIndex()	Obtiene el número total de paquetes de datos disponibles para el perfil adquirido.	UInt32	–
RequestProfileData(UInt32 index)	Solicita un paquete de datos de perfil correspondiente al índice especificado.	ProfileData	–
RequestProfileData(UInt32 index, Boolean isRotationCenterShift)	Solicita un paquete de datos de perfil considerando el desplazamiento del centro de rotación.	ProfileData	–
SetProfile(ProfileParameter parameter)	Configura los parámetros utilizados para la adquisición del perfil.	ErrorCode	–
SetProfile(ProfileParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros de adquisición del perfil utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
Tipos anidados			
ErrorCode	Enumeración que define los posibles códigos de error del proceso de adquisición del perfil.	Enum	–

Continued on next page

Table 2.6: Miembros de la clase **Profile** (Continued)

Status	Enumeración que representa los estados posibles del proceso de adquisición del perfil.	Enum	–
ProfileParameter	Clase que define los parámetros utilizados para configurar la adquisición de un perfil.	Class	–
ProfileData	Clase que almacena los datos obtenidos durante la adquisición de un perfil.	Class	–

2.7 Clase Angle Adjustment

Table 2.7: Miembros de la clase **AngleAdjustment**

Miembro	Descripción	Tipo .NET	Acceso
Constructores			
AngleAdjustment(UInt16 id)	Inicializa una nueva instancia de la clase asociada al identificador del módulo de ajuste angular especificado.	Constructor	–
Métodos			
Start()	Inicia el procedimiento de ajuste angular.	ErrorCode	–
Stop()	Detiene el procedimiento de ajuste angular.	ErrorCode	–
GetStatus()	Obtiene el estado actual del procedimiento de ajuste angular.	Status	–
GetErrorAxisID()	Obtiene el identificador del eje responsable del error actual.	UInt32	–
GetAdjustingStatus()	Obtiene el estado detallado del procedimiento de ajuste angular.	AdjustingStatus	–
GetProfilePacketSumIndex(ProfileDataType profileDataType)	Obtiene el número total de paquetes de datos disponibles para el tipo de perfil especificado.	UInt32	–
RequestProfileData(ProfileDataType profileDataType, UInt32 index)	Solicita un paquete de datos correspondiente al perfil y al índice especificados.	ProfileData	–
SetParameter(AngleAdjustmentParameter parameter)	Configura los parámetros utilizados durante el procedimiento de ajuste angular.	ErrorCode	–
SetParameter(AngleAdjustmentParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)	Configura los parámetros del procedimiento utilizando un centro de rotación definido.	ErrorCode	–
Tipos anidados			
ErrorCode	Enumeración que define los posibles códigos de error del procedimiento de ajuste angular.	Enum	–
Status	Enumeración que representa los estados posibles del procedimiento de ajuste angular.	Enum	–
AdjustingStatus	Enumeración que describe el estado interno del algoritmo de ajuste angular.	Enum	–
ProfileDataType	Enumeración que identifica los diferentes tipos de perfiles generados durante el procedimiento de ajuste angular.	Enum	–
AngleAdjustmentParameter	Clase que define los parámetros utilizados para configurar el procedimiento de ajuste angular.	Class	–

Continued on next page

Table 2.7: Miembros de la clase **AngleAdjustment** (Continued)

ProfileData	Clase que almacena los datos de perfil obtenidos durante el procedimiento de ajuste angular.	Class	—
-------------	--	-------	---

Appendix A

Instalación TwinCAT XAE eXtended Automation Engineering

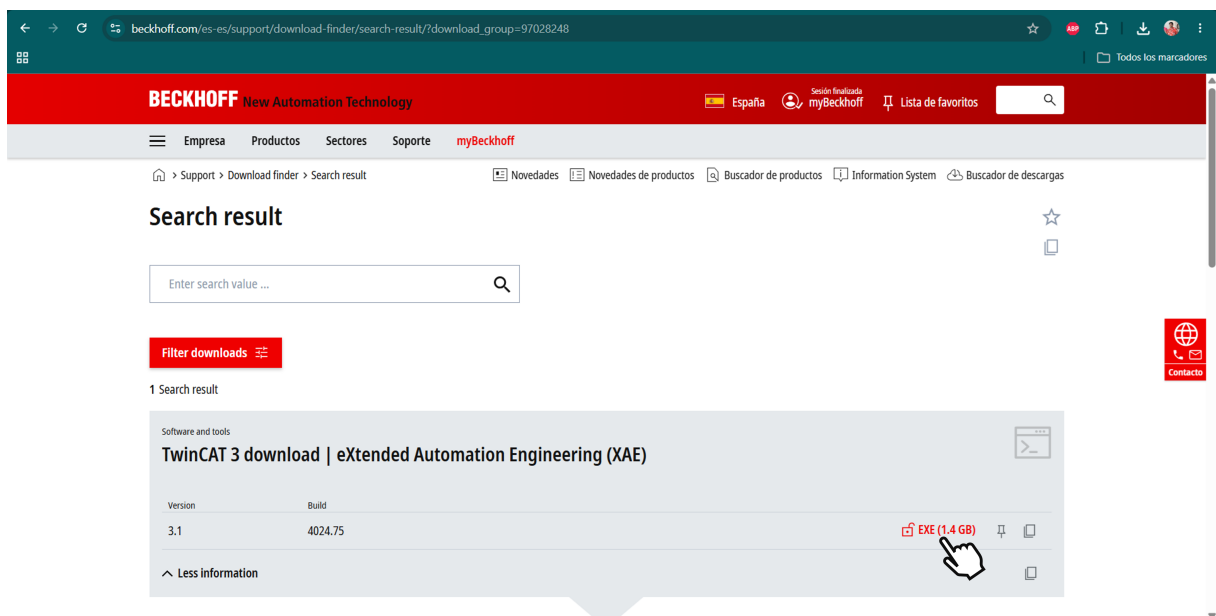


Figure A.1: Pendiente.

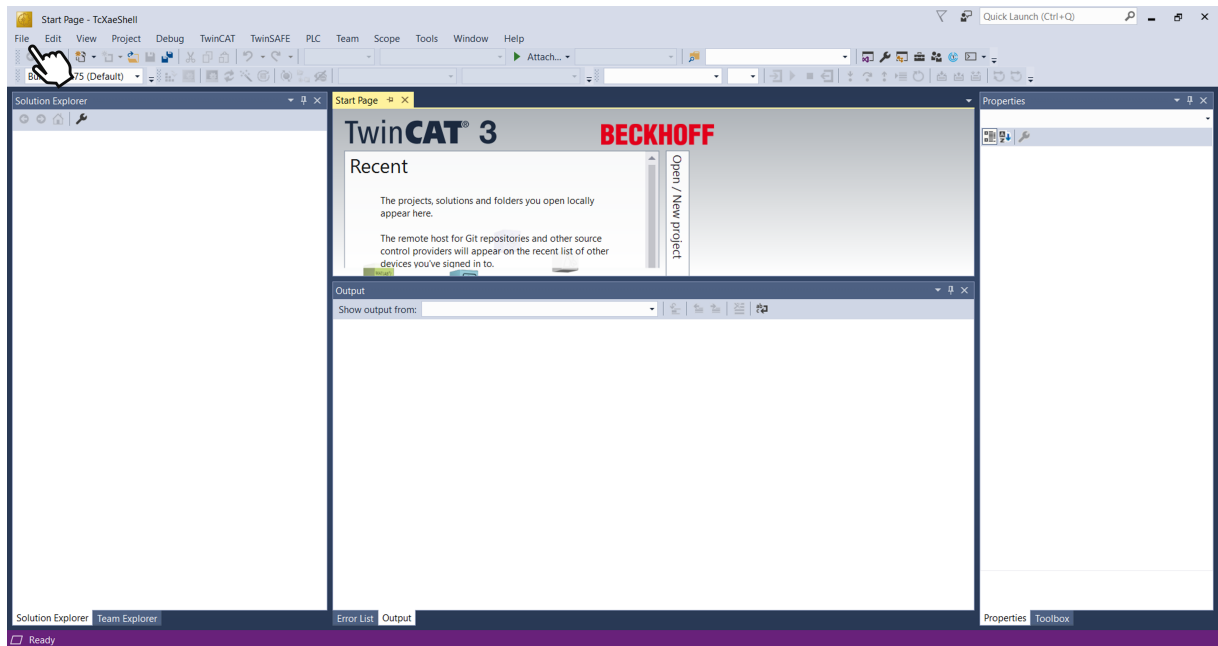


Figure A.2: Pendiente.

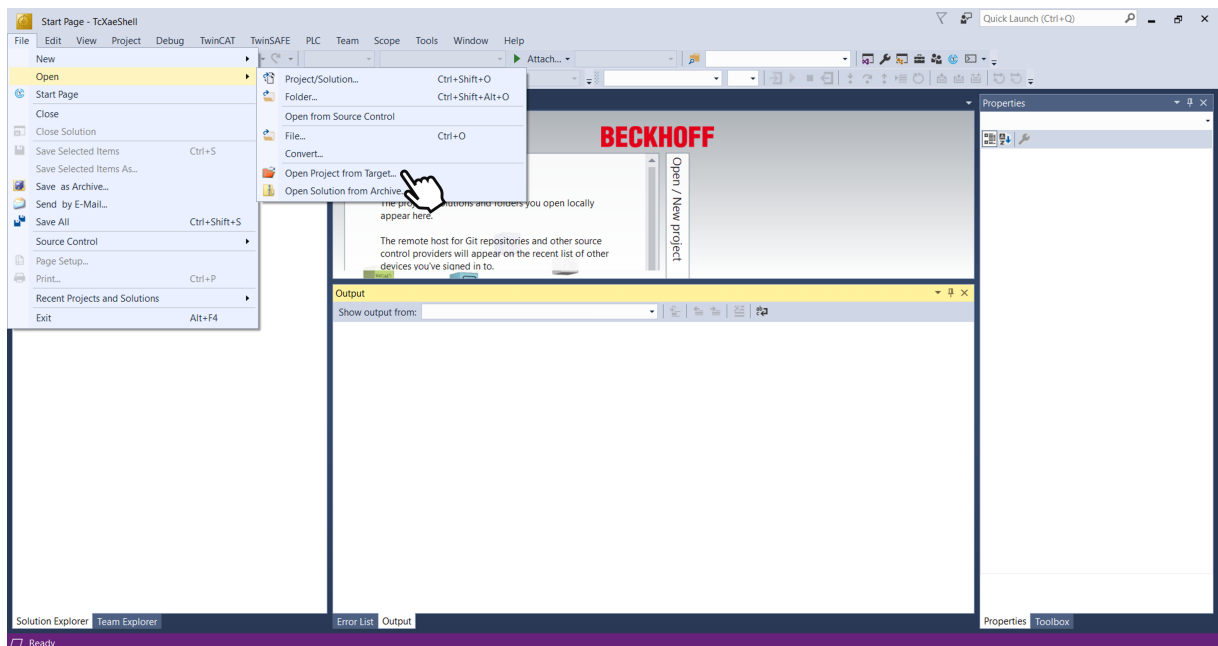


Figure A.3: Pendiente.

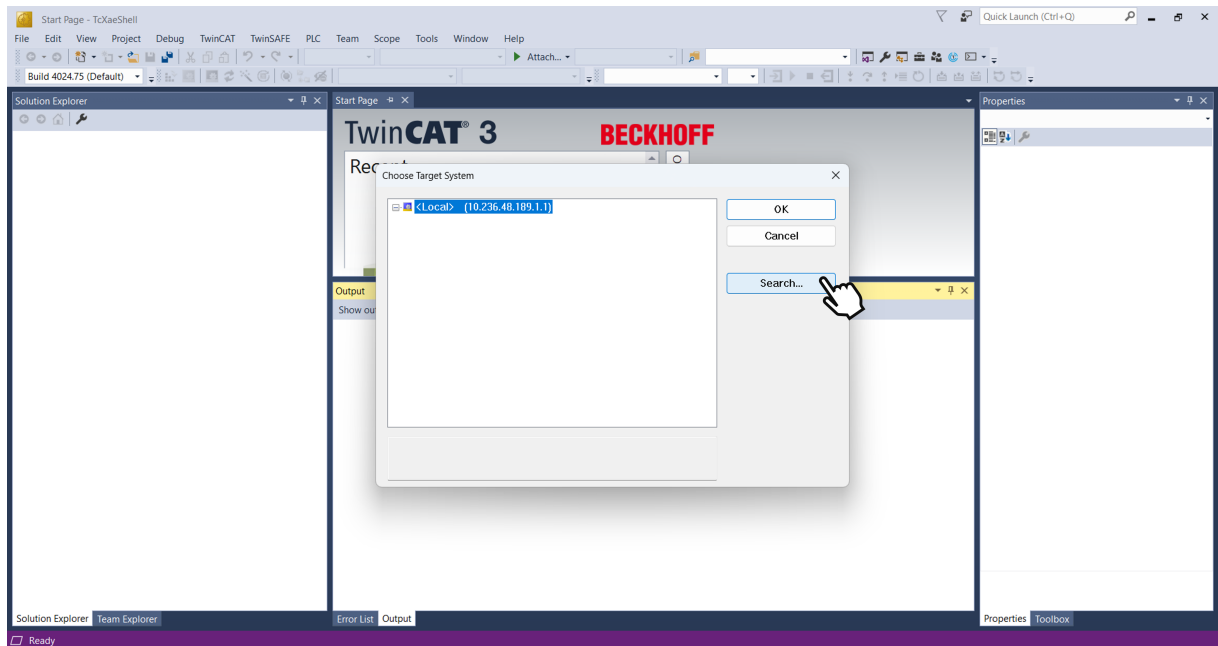


Figure A.4: Pendiente.

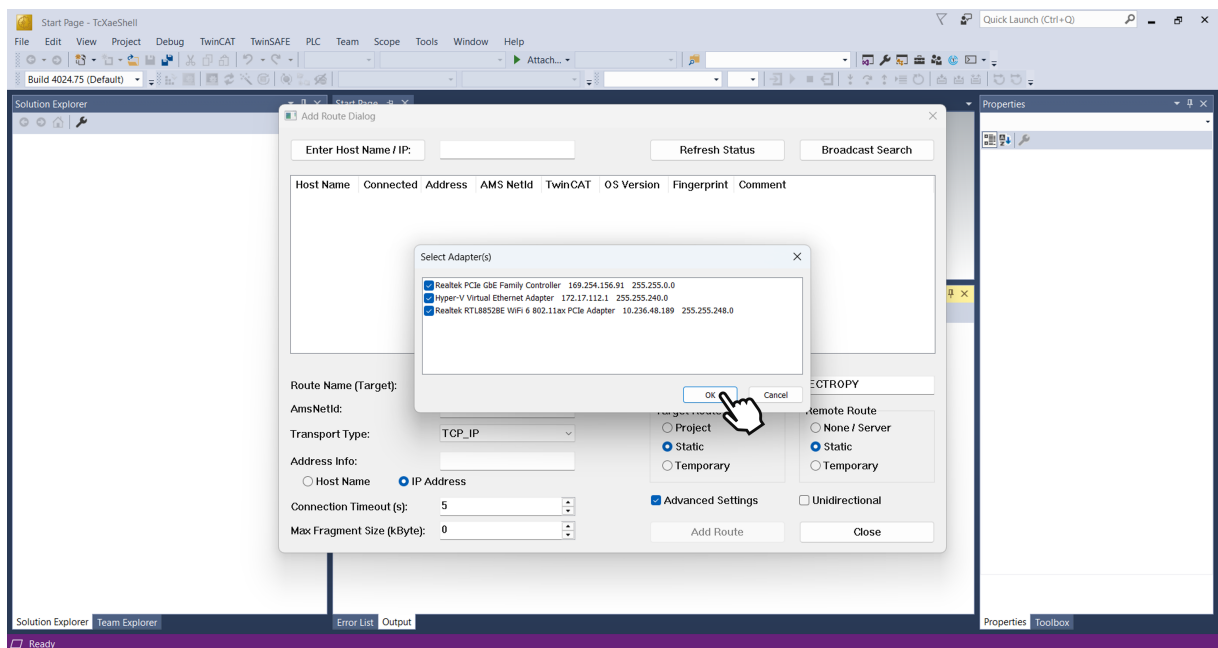


Figure A.5: Pendiente.

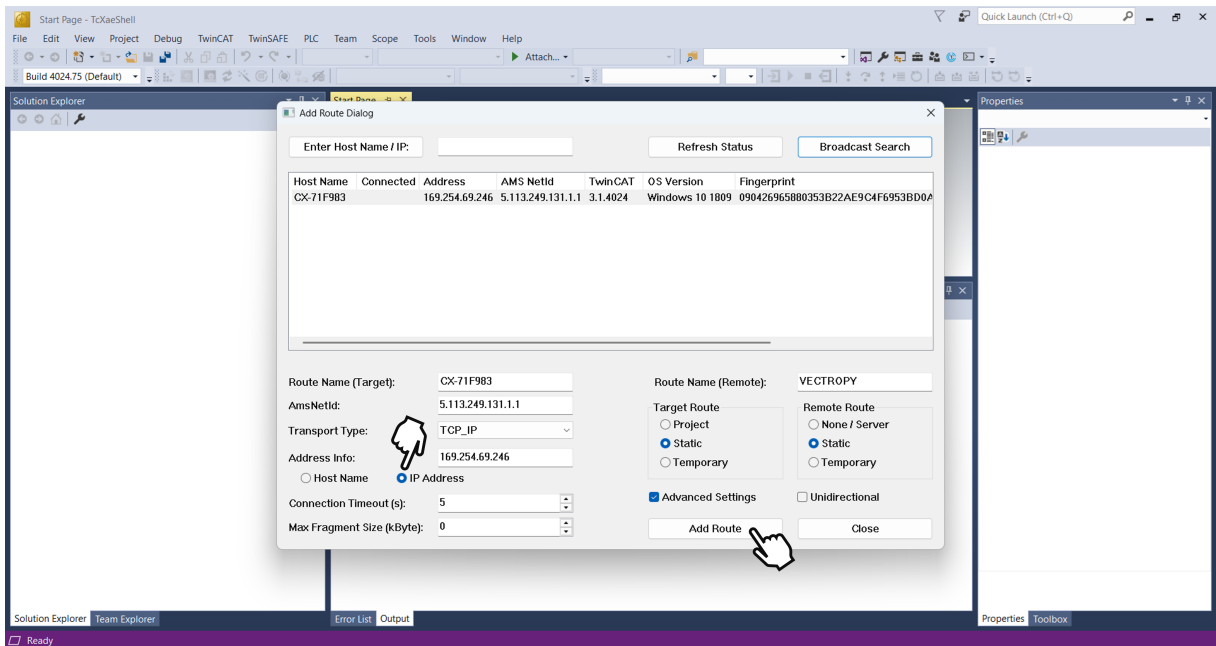


Figure A.6: Pendiente.

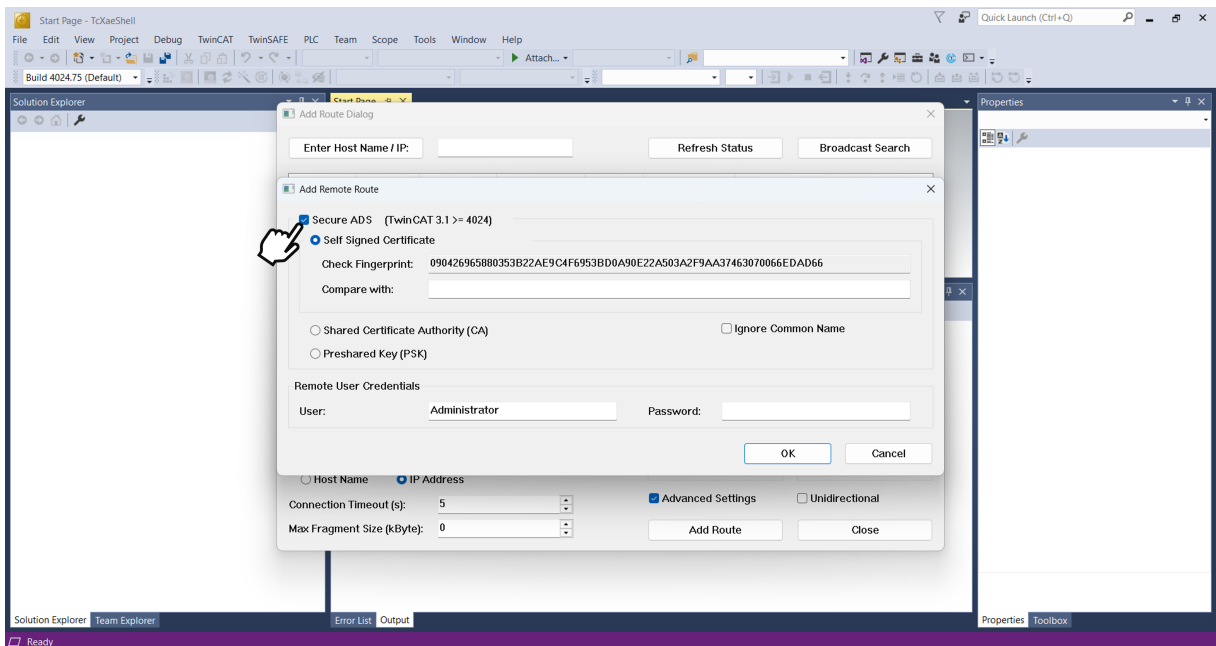


Figure A.7: Pendiente.

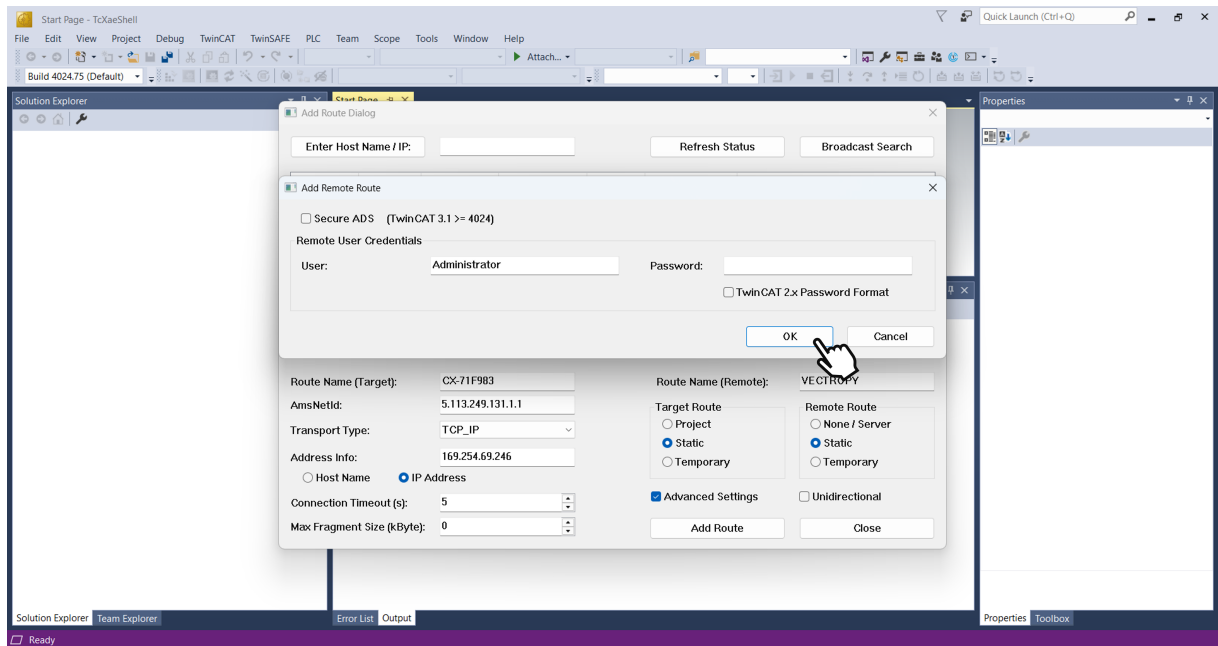


Figure A.8: Pendiente.

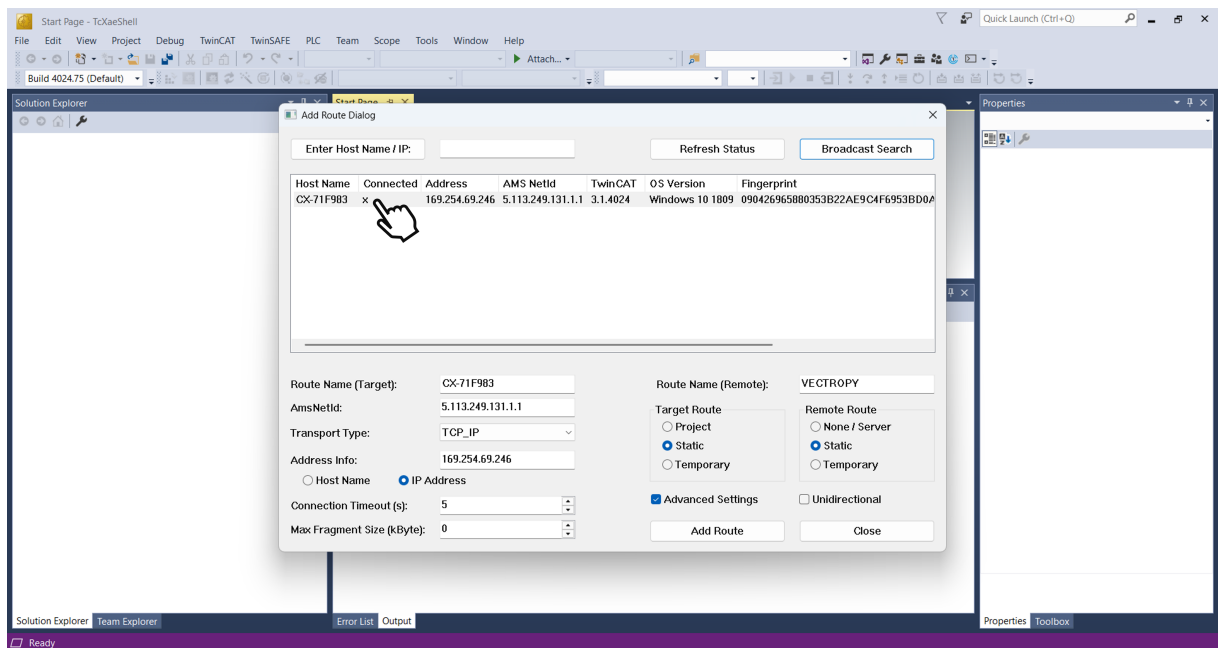


Figure A.9: Pendiente.

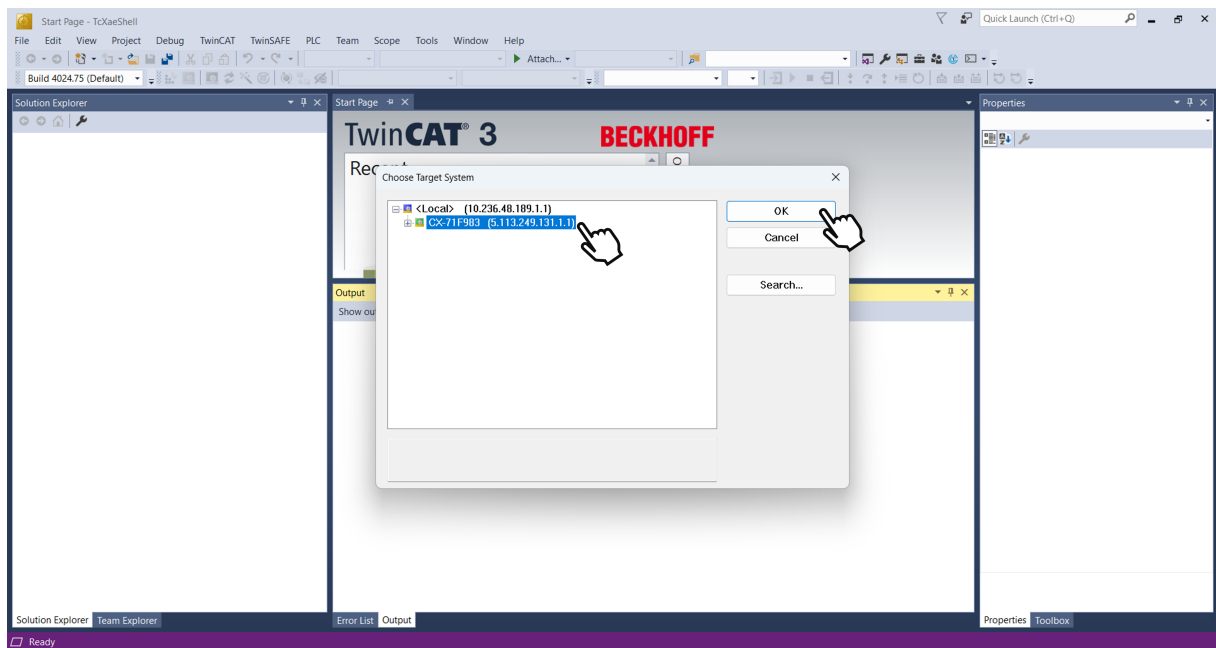


Figure A.10: Pendiente.

Appendix B

Documentacion de la API Suruga Seiki

Es necesario cargar el ensamblado (assembly), una unidad de código previamente compilada que permite establecer la comunicación con la plataforma Suruga Seiki. Este ensamblado está compuesto por un conjunto de clases que definen las propiedades (atributos) y los métodos (acciones o funcionalidades) disponibles en la plataforma.

En programación orientada a objetos, los métodos representan las acciones que una clase puede ejecutar, mientras que las propiedades describen las características asociadas a sus objetos. Un objeto es una instancia concreta de una clase; utilizando una analogía, la clase puede entenderse como un plano de construcción y el objeto como el resultado material obtenido a partir de ese plano.

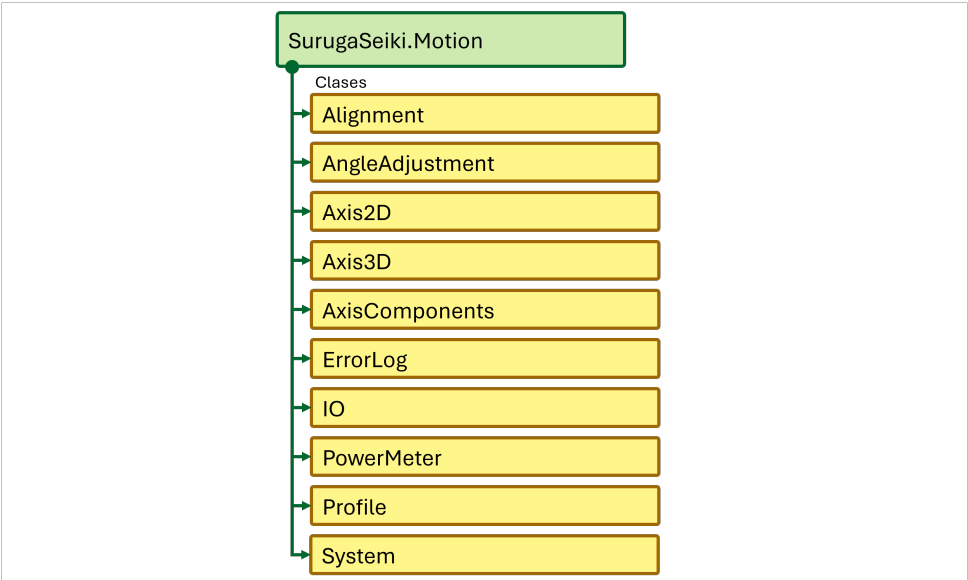


Figure B.1: Pendiente.

B.1 Clase Alignment

```
=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment
=====

Constructores:
```

```

Alignment()
Alignment(UInt16 id)

Metodos:
    ErrorCode StartSingle()
    ErrorCode StartFlat()
    ErrorCode StartFocus()
    ErrorCode StartTwoChRotation()
    ErrorCode StartMMFRotation()
    ErrorCode StartLoopBack()
    ErrorCode StartCommon()
    ErrorCode Stop()
    ErrorCode GetErrorCode()
    Status GetStatus()
    UInt32 GetErrorAxisID()
    AligningStatusCode GetAligningStatus()
    UInt32 GetProfilePacketSumIndex(ProfileDataType profileDataType)
    ProfileData RequestProfileData(ProfileDataType profileDataType, UInt32 index)
    ProfileData RequestProfileData(ProfileDataType profileDataType, UInt32 index, Boolean isRotationCenterShift)
    Double GetVoltage(UInt32 alignmentAInCh)
    Double GetPower(UInt32 alignmentPMCh)
    Double GetMeasurementWaveLength(UInt32 alignmentPMCh)
    ErrorCode SetSingle(ISingleParameter parameter)
    ErrorCode SetSingle(ISingleParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)
    ErrorCode SetFlat(IFlatParameter parameter)
    ErrorCode SetFlat(IFlatParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)
    ErrorCode SetFocus(IFocusParameter parameter)
    ErrorCode SetFocus(IFocusParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)
    ErrorCode SetTwoChRotation(ITwoChRotationParameter parameter)
    ErrorCode SetTwoChRotation(ITwoChRotationParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)
    ErrorCode SetMMFRotation(IMMFRotationParameter parameter)
    ErrorCode SetMMFRotation(IMMFRotationParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)
    ErrorCode SetLoopBack(ILoopBackParameter parameter)
    ErrorCode SetLoopBack(ILoopBackParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)
    ErrorCode SetCommon(CommonParameter parameter)
    ErrorCode SetCommon(CommonParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)
    ErrorCode SetMeasurementWaveLength(UInt32 alignmentPMCh, Double waveLength)

Tipos anidados/enums:
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+AlignmentType
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+ErrorCode
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+Status
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+AligningStatusCode
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+ProfileDataType
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+ZMode
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+ISharingParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+ISingleParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+SingleParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+IFlatParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+FlatParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+IFocusParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+FocusParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+ITwoChRotationParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+TwoChRotationParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+IMMFRotationParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+MMFRotationParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+ILoopBackParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+LoopBackParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+ICommonParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+CommonParameter
    SurugaSeiki.Motion.Alignment+ProfileData

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+AligningStatusCode
=====

Campos:
    Int32 value__
    static AligningStatusCode NotAligning
    static AligningStatusCode Initializing
    static AligningStatusCode FieldSearching
    static AligningStatusCode PeakSearchingX
    static AligningStatusCode PeakSearchingY
    static AligningStatusCode PeakSearchingZ
    static AligningStatusCode PeakSearchXCh2
    static AligningStatusCode PeakSearchYCh2

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+AlignmentType
=====

Campos:
    Int32 value__
    static AlignmentType Single
    static AlignmentType Flat
    static AlignmentType Focus
    static AlignmentType TwoChRotation
    static AlignmentType MMFRotation
    static AlignmentType LoopBack
    static AlignmentType TwoChFlat

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+CommonParameter
=====

Propiedades:
    AlignmentType alignmentType (get/set)
    ZMode zMode (get/set)
    UInt16 mainStageNumberX (get/set)

```



```

UInt16 mainStageNumberY (get/set)
UInt16 mainStageNumberZ (get/set)
UInt16 subStageNumberX (get/set)
UInt16 subStageNumberXY (get/set)
Double subAngleX (get/set)
Double subAngleY (get/set)
UInt16 rotateStageNumber (get/set)
Double rotateSpeed (get/set)
Int16 rotateDirection (get/set)
Double coreDistance (get/set)
UInt16 mmfStageNumber (get/set)
Double mmfSpeed (get/set)
Double mmfDistance (get/set)
UInt16 pmCh (get/set)
UInt16 pmCh1 (get/set)
UInt16 pmCh2 (get/set)
UInt16 analogCh (get/set)
UInt16 analogCh1 (get/set)
UInt16 analogCh2 (get/set)
Boolean pmAutoRangeUpOn (get/set)
Boolean pmInitRangeSettingOn (get/set)
Int16 pmInitRange (get/set)
Int16 pmInitRangeCh1 (get/set)
Int16 pmInitRangeCh2 (get/set)
Double fieldSearchThreshold (get/set)
Double fieldSearchThresholdCh1 (get/set)
Double fieldSearchThresholdCh2 (get/set)
Double peakSearchThreshold (get/set)
Double peakSearchThresholdXY (get/set)
Double peakSearchThresholdCh1 (get/set)
Double peakSearchThresholdCh2 (get/set)
Double peakSearchThresholdZ (get/set)
Double searchRangeX (get/set)
Double searchRangeY (get/set)
Double searchRangeZ (get/set)
Double fieldSearchPitchX (get/set)
Double fieldSearchPitchY (get/set)
Double fieldSearchPitchZ (get/set)
Double fieldSearchFirstPitchX (get/set)
Double fieldSearchSpeedX (get/set)
Double fieldSearchSpeedY (get/set)
Double fieldSearchSpeedZ (get/set)
Double peakSearchSpeedX (get/set)
Double peakSearchSpeedY (get/set)
Double peakSearchSpeedZ (get/set)
UInt32 smoothingRangeX (get/set)
UInt32 smoothingRangeY (get/set)
UInt32 smoothingRangeZ (get/set)
Double centroidThresholdX (get/set)
Double centroidThresholdY (get/set)
Double centroidThresholdZ (get/set)
Double convergentRangeX (get/set)
Double convergentRangeY (get/set)
Double convergentRangeZ (get/set)
UInt16 comparisonCount (get/set)
UInt16 maxRepeatCount (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+ErrorCode
=====

Campos:
    Int32 value_
    static ErrorCode None
    static ErrorCode Axis
    static ErrorCode Aligning
    static ErrorCode Parameter

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+FlatParameter
=====

Propiedades:
    UInt16 mainStageNumberX (get/set)
    UInt16 mainStageNumberY (get/set)
    UInt16 subStageNumberXY (get/set)
    Double subAngleX (get/set)
    Double subAngleY (get/set)
    UInt16 pmCh (get/set)
    UInt16 analogCh (get/set)
    Boolean pmAutoRangeUpOn (get/set)
    Boolean pmInitRangeSettingOn (get/set)
    Int16 pmInitRange (get/set)
    Double fieldSearchThreshold (get/set)
    Double peakSearchThreshold (get/set)
    Double searchRangeX (get/set)
    Double searchRangeY (get/set)
    Double fieldSearchPitchX (get/set)
    Double fieldSearchPitchY (get/set)
    Double fieldSearchFirstPitchX (get/set)
    Double fieldSearchSpeedX (get/set)
    Double fieldSearchSpeedY (get/set)
    Double peakSearchSpeedX (get/set)
    Double peakSearchSpeedY (get/set)
    UInt32 smoothingRangeX (get/set)
    UInt32 smoothingRangeY (get/set)
    Double centroidThresholdX (get/set)
    Double centroidThresholdY (get/set)
    Double convergentRangeX (get/set)

```

```

Double convergentRangeY (get/set)
UInt16 comparisonCount (get/set)
UInt16 maxRepeatCount (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+FocusParameter
=====

Propiedades:
ZMode zMode (get/set)
UInt16 mainStageNumberX (get/set)
UInt16 mainStageNumberY (get/set)
UInt16 mainStageNumberZ (get/set)
UInt16 subStageNumberXY (get/set)
Double subAngleX (get/set)
Double subAngleY (get/set)
UInt16 pmCh (get/set)
UInt16 analogCh (get/set)
Boolean pmAutoRangeUpOn (get/set)
Boolean pmInitRangeSettingOn (get/set)
Int16 pmInitRange (get/set)
Double fieldSearchThreshold (get/set)
Double peakSearchThresholdXY (get/set)
Double peakSearchThresholdZ (get/set)
Double searchRangeX (get/set)
Double searchRangeY (get/set)
Double searchRangeZ (get/set)
Double fieldSearchPitchX (get/set)
Double fieldSearchPitchY (get/set)
Double fieldSearchPitchZ (get/set)
Double fieldSearchFirstPitchX (get/set)
Double fieldSearchSpeedX (get/set)
Double fieldSearchSpeedY (get/set)
Double fieldSearchSpeedZ (get/set)
Double peakSearchSpeedX (get/set)
Double peakSearchSpeedY (get/set)
Double peakSearchSpeedZ (get/set)
UInt32 smoothingRangeX (get/set)
UInt32 smoothingRangeY (get/set)
UInt32 smoothingRangeZ (get/set)
Double centroidThresholdX (get/set)
Double centroidThresholdY (get/set)
Double centroidThresholdZ (get/set)
Double convergentRangeX (get/set)
Double convergentRangeY (get/set)
Double convergentRangeZ (get/set)
UInt16 comparisonCount (get/set)
UInt16 maxRepeatCount (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+ICommonParameter
=====

Propiedades:
AlignmentType alignmentType (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+IFlatParameter
=====

Propiedades:
UInt16 mainStageNumberY (get/set)
UInt16 subStageNumberXY (get/set)
Double subAngleY (get/set)
UInt16 pmCh (get/set)
UInt16 analogCh (get/set)
Int16 pmInitRange (get/set)
Double fieldSearchThreshold (get/set)
Double peakSearchThreshold (get/set)
Double searchRangeY (get/set)
Double fieldSearchPitchX (get/set)
Double fieldSearchPitchY (get/set)
Double fieldSearchFirstPitchX (get/set)
Double fieldSearchSpeedY (get/set)
Double peakSearchSpeedY (get/set)
UInt32 smoothingRangeY (get/set)
Double centroidThresholdY (get/set)
Double convergentRangeY (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+IFocusParameter
=====

Propiedades:
ZMode zMode (get/set)
UInt16 mainStageNumberY (get/set)
UInt16 mainStageNumberZ (get/set)
UInt16 subStageNumberXY (get/set)
Double subAngleY (get/set)
UInt16 pmCh (get/set)
UInt16 analogCh (get/set)
Int16 pmInitRange (get/set)
Double fieldSearchThreshold (get/set)
Double peakSearchThresholdXY (get/set)
Double peakSearchThresholdZ (get/set)
Double searchRangeY (get/set)
Double searchRangeZ (get/set)
Double fieldSearchPitchX (get/set)
Double fieldSearchPitchY (get/set)

```

```

Double fieldSearchPitchZ (get/set)
Double fieldSearchFirstPitchX (get/set)
Double fieldSearchSpeedY (get/set)
Double fieldSearchSpeedZ (get/set)
Double peakSearchSpeedY (get/set)
Double peakSearchSpeedZ (get/set)
UInt32 smoothingRangeY (get/set)
UInt32 smoothingRangeZ (get/set)
Double centroidThresholdY (get/set)
Double centroidThresholdZ (get/set)
Double convergentRangeY (get/set)
Double convergentRangeZ (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+ILoopBackParameter
=====

Propiedades:
  UInt16 mainStageNumberY (get/set)
  UInt16 mainStageNumberZ (get/set)
  UInt16 subStageNumberXY (get/set)
  Double subAngleY (get/set)
  UInt16 pmCh (get/set)
  UInt16 analogCh (get/set)
  Int16 pmInitRange (get/set)
  Double fieldSearchThreshold (get/set)
  Double peakSearchThresholdXY (get/set)
  Double peakSearchThresholdZ (get/set)
  Double searchRangeY (get/set)
  Double searchRangeZ (get/set)
  Double fieldSearchPitchX (get/set)
  Double fieldSearchPitchY (get/set)
  Double fieldSearchPitchZ (get/set)
  Double fieldSearchFirstPitchX (get/set)
  Double fieldSearchSpeedY (get/set)
  Double fieldSearchSpeedZ (get/set)
  Double peakSearchSpeedY (get/set)
  Double peakSearchSpeedZ (get/set)
  UInt32 smoothingRangeY (get/set)
  UInt32 smoothingRangeZ (get/set)
  Double centroidThresholdY (get/set)
  Double centroidThresholdZ (get/set)
  Double convergentRangeY (get/set)
  Double convergentRangeZ (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+IMMFRotationParameter
=====

Propiedades:
  UInt16 mmfStageNumber (get/set)
  Double mmfSpeed (get/set)
  Double mmfDistance (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+ISharingParameter
=====

Propiedades:
  UInt16 mainStageNumberX (get/set)
  Double subAngleX (get/set)
  Boolean pmAutoRangeUpOn (get/set)
  Boolean pmInitRangeSettingOn (get/set)
  Double searchRangeX (get/set)
  Double fieldSearchSpeedX (get/set)
  Double peakSearchSpeedX (get/set)
  UInt32 smoothingRangeX (get/set)
  Double centroidThresholdX (get/set)
  Double convergentRangeX (get/set)
  UInt16 comparisonCount (get/set)
  UInt16 maxRepeatCount (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+ISingleParameter
=====

Propiedades:
  ZMode zMode (get/set)
  UInt16 subStageNumberX (get/set)
  UInt16 pmCh (get/set)
  UInt16 analogCh (get/set)
  Int16 pmInitRange (get/set)
  Double fieldSearchThreshold (get/set)
  Double peakSearchThreshold (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+ITwoChRotationParameter
=====

Propiedades:
  UInt16 mainStageNumberY (get/set)
  UInt16 subStageNumberXY (get/set)
  Double subAngleY (get/set)
  UInt16 rotateStageNumber (get/set)
  Double rotateSpeed (get/set)
  Int16 rotateDirection (get/set)
  Double coreDistance (get/set)
  UInt16 pmCh1 (get/set)
  UInt16 pmCh2 (get/set)

```

```

UInt16 analogCh1 (get/set)
UInt16 analogCh2 (get/set)
Int16 pmInitRangeCh1 (get/set)
Int16 pmInitRangeCh2 (get/set)
Double fieldSearchThresholdCh1 (get/set)
Double fieldSearchThresholdCh2 (get/set)
Double peakSearchThresholdCh1 (get/set)
Double peakSearchThresholdCh2 (get/set)
Double searchRangeY (get/set)
Double fieldSearchPitchX (get/set)
Double fieldSearchPitchY (get/set)
Double fieldSearchFirstPitchX (get/set)
Double fieldSearchSpeedY (get/set)
Double peakSearchSpeedY (get/set)
UInt32 smoothingRangeY (get/set)
Double centroidThresholdY (get/set)
Double convergentRangeY (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+LoopBackParameter
=====

Propiedades:
  UInt16 mainStageNumberX (get/set)
  UInt16 mainStageNumberY (get/set)
  UInt16 mainStageNumberZ (get/set)
  UInt16 subStageNumberXY (get/set)
  Double subAngleX (get/set)
  Double subAngleY (get/set)
  UInt16 pmCh (get/set)
  UInt16 analogCh (get/set)
  Boolean pmAutoRangeUpOn (get/set)
  Boolean pmInitRangeSettingOn (get/set)
  Int16 pmInitRange (get/set)
  Double fieldSearchThreshold (get/set)
  Double peakSearchThresholdXY (get/set)
  Double peakSearchThresholdZ (get/set)
  Double searchRangeX (get/set)
  Double searchRangeY (get/set)
  Double searchRangeZ (get/set)
  Double fieldSearchPitchX (get/set)
  Double fieldSearchPitchY (get/set)
  Double fieldSearchPitchZ (get/set)
  Double fieldSearchFirstPitchX (get/set)
  Double fieldSearchSpeedX (get/set)
  Double fieldSearchSpeedY (get/set)
  Double fieldSearchSpeedZ (get/set)
  Double peakSearchSpeedX (get/set)
  Double peakSearchSpeedY (get/set)
  Double peakSearchSpeedZ (get/set)
  UInt32 smoothingRangeX (get/set)
  UInt32 smoothingRangeY (get/set)
  UInt32 smoothingRangeZ (get/set)
  Double centroidThresholdX (get/set)
  Double centroidThresholdY (get/set)
  Double centroidThresholdZ (get/set)
  Double convergentRangeX (get/set)
  Double convergentRangeY (get/set)
  Double convergentRangeZ (get/set)
  UInt16 comparisonCount (get/set)
  UInt16 maxRepeatCount (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+MMFRotationParameter
=====

Propiedades:
  UInt16 mainStageNumberX (get/set)
  UInt16 mainStageNumberY (get/set)
  UInt16 subStageNumberXY (get/set)
  Double subAngleX (get/set)
  Double subAngleY (get/set)
  UInt16 rotateStageNumber (get/set)
  Double rotateSpeed (get/set)
  Int16 rotateDirection (get/set)
  Double coreDistance (get/set)
  UInt16 mmfStageNumber (get/set)
  Double mmfSpeed (get/set)
  Double mmfDistance (get/set)
  UInt16 pmCh1 (get/set)
  UInt16 pmCh2 (get/set)
  UInt16 analogCh1 (get/set)
  UInt16 analogCh2 (get/set)
  Boolean pmAutoRangeUpOn (get/set)
  Boolean pmInitRangeSettingOn (get/set)
  Int16 pmInitRangeCh1 (get/set)
  Int16 pmInitRangeCh2 (get/set)
  Double fieldSearchThresholdCh1 (get/set)
  Double fieldSearchThresholdCh2 (get/set)
  Double peakSearchThresholdCh1 (get/set)
  Double peakSearchThresholdCh2 (get/set)
  Double searchRangeX (get/set)
  Double searchRangeY (get/set)
  Double fieldSearchPitchX (get/set)
  Double fieldSearchPitchY (get/set)
  Double fieldSearchFirstPitchX (get/set)
  Double fieldSearchSpeedX (get/set)
  Double fieldSearchSpeedY (get/set)
  Double peakSearchSpeedX (get/set)

```

```

Double peakSearchSpeedY (get/set)
UInt32 smoothingRangeX (get/set)
UInt32 smoothingRangeY (get/set)
Double centroidThresholdX (get/set)
Double centroidThresholdY (get/set)
Double convergentRangeX (get/set)
Double convergentRangeY (get/set)
UInt16 comparisonCount (get/set)
UInt16 maxRepeatCount (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+ProfileData
=====

Campos:
  UInt16 mainAxisNumber
  UInt16 sub1AxisNumber
  UInt16 sub2AxisNumber
  UInt16 signalCh1Number
  UInt16 signalCh2Number
  UInt32 packetIndex
  UInt32 dataCount
  Double[] mainPositionList
  Double[] sub1PositionList
  Double[] sub2PositionList
  Double[] signalCh1List
  Double[] signalCh2List

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+ProfileDataType
=====

Campos:
  Int32 value_
  static ProfileDataType FieldSearch
  static ProfileDataType PeakSearchX
  static ProfileDataType PeakSearchY
  static ProfileDataType PeakSearchZ
  static ProfileDataType PeakSearchXCh2
  static ProfileDataType PeakSearchYCh2

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+SingleParameter
=====

Propiedades:
  ZMode zMode (get/set)
  UInt16 mainStageNumberX (get/set)
  UInt16 subStageNumberX (get/set)
  Double subAngleX (get/set)
  UInt16 pmCh (get/set)
  UInt16 analogCh (get/set)
  Boolean pmAutoRangeUpOn (get/set)
  Boolean pmInitRangeSettingOn (get/set)
  Int16 pmInitRange (get/set)
  Double fieldSearchThreshold (get/set)
  Double peakSearchThreshold (get/set)
  Double searchRangeX (get/set)
  Double fieldSearchSpeedX (get/set)
  Double peakSearchSpeedX (get/set)
  UInt32 smoothingRangeX (get/set)
  Double centroidThresholdX (get/set)
  Double convergentRangeX (get/set)
  UInt16 comparisonCount (get/set)
  UInt16 maxRepeatCount (get/set)

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+Status
=====

Campos:
  Int32 value_
  static Status Stopping
  static Status Success
  static Status Aligning
  static Status FieldSearchRangeOver
  static Status ProfileDataOver
  static Status PeakSearchCountOver
  static Status PeakSearchRangeOver
  static Status InvalidParameter
  static Status ServoIsNotReady
  static Status ServoIsAlarm
  static Status StageOnLimit
  static Status VoltageLimit
  static Status PMRangeLimit
  static Status PMInitRangeChangeFail
  static Status PMDisconnected
  static Status RotationAdjustmentFail
  static Status InPositionFail
  static Status TorqueLimit

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+TwoChRotationParameter
=====

Propiedades:
  UInt16 mainStageNumberX (get/set)
  UInt16 mainStageNumberY (get/set)
  UInt16 subStageNumberXY (get/set)

```

```

Double subAngleX (get/set)
Double subAngleY (get/set)
UInt16 rotateStageNumber (get/set)
Double rotateSpeed (get/set)
Int16 rotateDirection (get/set)
Double coreDistance (get/set)
UInt16 pmCh1 (get/set)
UInt16 pmCh2 (get/set)
UInt16 analogCh1 (get/set)
UInt16 analogCh2 (get/set)
Boolean pmAutoRangeUpOn (get/set)
Boolean pmInitRangeSettingOn (get/set)
Int16 pmInitRangeCh1 (get/set)
Int16 pmInitRangeCh2 (get/set)
Double fieldSearchThresholdCh1 (get/set)
Double fieldSearchThresholdCh2 (get/set)
Double peakSearchThresholdCh1 (get/set)
Double peakSearchThresholdCh2 (get/set)
Double searchRangeX (get/set)
Double searchRangeY (get/set)
Double fieldSearchPitchX (get/set)
Double fieldSearchPitchY (get/set)
Double fieldSearchFirstPitchX (get/set)
Double fieldSearchSpeedX (get/set)
Double fieldSearchSpeedY (get/set)
Double peakSearchSpeedX (get/set)
Double peakSearchSpeedY (get/set)
UInt32 smoothingRangeX (get/set)
UInt32 smoothingRangeY (get/set)
Double centroidThresholdX (get/set)
Double centroidThresholdY (get/set)
Double convergentRangeX (get/set)
Double convergentRangeY (get/set)
UInt16 comparisonCount (get/set)
UInt16 maxRepeatCount (get/set)

```

```

=====
SurugaSeiki.Motion.Alignment+ZMode
=====

```

```

Campos:
    Int32 value_
    static ZMode Round
    static ZMode ForwardPlus
    static ZMode ForwardMinus

```

B.2 Clase AngleAdjustment

```

=====
SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment
=====

```

```

Constructores:
    AngleAdjustment(UInt16 id)

Metodos:
    ErrorCode Start()
    ErrorCode Stop()
    Status GetStatus()
    UInt32 GetErrorAxisID()
    AdjustingStatus GetAdjustingStatus()
    UInt32 GetProfilePacketSumIndex(ProfileDataType profileDataType)
    ProfileData RequestProfileData(ProfileDataType profileDataType, UInt32 index)
    ErrorCode SetParameter(AngleAdjustmentParameter parameter)
    ErrorCode SetParameter(AngleAdjustmentParameter parameter, RotationCenter rotationCenter)

```

```

Tipos anidados/enums:
    SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+ErrorCode
    SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+Status
    SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+AdjustingStatus
    SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+ProfileDataType
    SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+AngleAdjustmentParameter
    SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+ProfileData

```

```

=====
SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+AdjustingStatus
=====

```

```

Campos:
    Int32 value_
    static AdjustingStatus NotAdjusting
    static AdjustingStatus Initializing
    static AdjustingStatus ContactingZ
    static AdjustingStatus AdjustingTx
    static AdjustingStatus AdjustingTy

```

```

=====
SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+AngleAdjustmentParameter
=====

```

```

Campos:
    Double gap
    UInt16 signalChNumber

```

```

Double signalLowerLimit
UInt16 unlockDOutChNumber
Boolean unlockDOutControlOn
Boolean lockUnlockAdjustEnbale
Double lockUnlockDifference
UInt16 contactAxisNumber
Double contactSearchRange
Double contactSearchSpeed
UInt32 contactSmoothing
UInt32 contactSensitivity
Double pushDistance
UInt16 angleAxisNumberTx
UInt16 angleAxisNumberTy
Double angleSearchRangeTx
Double angleSearchRangeTy
Double angleSearchSpeedTx
Double angleSearchSpeedTy
UInt32 angleSmoothingTx
UInt32 angleSmoothingTy
UInt32 angleSensitivityTx
UInt32 angleSensitivityTy
UInt16 angleJudgeCountTx
UInt16 angleJudgeCountTy
Double angleConvergentRangeTx
Double angleConvergentRangeTy
UInt16 angleComparisonCount
UInt16 angleMaxCount
=====
SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+ErrorCode
=====

Campos:
    Int32 value__
    static ErrorCode None
    static ErrorCode Axis
    static ErrorCode Adjusting
    static ErrorCode Parameter
=====
SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+ProfileData
=====

Campos:
    UInt16 mainAxisNumber
    UInt16 sub1AxisNumber
    UInt16 sub2AxisNumber
    UInt16 signalCh1Number
    UInt16 signalCh2Number
    UInt32 packetIndex
    UInt32 dataCount
    Double[] mainPositionList
    Double[] sub1PositionList
    Double[] sub2PositionList
    Double[] signalCh1List
    Double[] signalCh2List
=====
SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+ProfileDataType
=====

Campos:
    Int32 value__
    static ProfileDataType ContactZ
    static ProfileDataType AdjustmentTx
    static ProfileDataType AdjustmentTy
=====
SurugaSeiki.Motion.AngleAdjustment+Status
=====

Campos:
    Int32 value__
    static Status Stopping
    static Status Success
    static Status Adjusting
    static Status ProfileDataOver
    static Status InvalidParameter
    static Status ServoIsNotReady
    static Status ServoIsAlarm
    static Status StageOnLimit
    static Status SignalLowerLimit
    static Status CouldnotContact
    static Status AdjustCountOver
    static Status AngleAdjustRnageOver
    static Status LostContact

```

B.3 Clase Axis2D

```

=====
SurugaSeiki.Motion.Axis2D
=====

```

```
Constructores:
    Axis2D(UInt16 mainStageNumber, UInt16 subStageNumber)

Metodos:
    ErrorCode SetAxisNumber(UInt16 mainStageNumber, UInt16 subStageNumber)
    UInt16[] GetAxisNumber()
    ErrorCode MoveAbsolute(Point targetPosition)
    ErrorCode MoveAbsolute(Double mainTargetPosition, Double subTargetPosition)
    ErrorCode MoveRelative(Point targetDistance)
    ErrorCode MoveRelative(Double mainDistance, Double subDistance)
    ErrorCode MoveAbsoluteAngle(Double mainTargetPosition, Double subAngle)
    ErrorCode MoveRelativeAngle(Double mainDistance, Double subAngle)
    ErrorCode Stop()
    Point GetTargetPosition()
    Point GetActualPosition()
    Boolean IsMoving()
    ErrorCode SetSpeed(Double speed)
    ErrorCode SetAccelRate(Double rate)
    ErrorCode SetDecelRate(Double rate)
    ErrorCode GetErrorCode()
    Status GetStatus()

Tipos anidados/enums:
    SurugaSeiki.Motion.Axis2D+Point

=====
SurugaSeiki.Motion.Axis2D+Point
=====

Campos:
    Double X
    Double Y
```

B.4 Clase Axis3D

```
=====
SurugaSeiki.Motion.Axis3D
=====

Constructores:
    Axis3D(UInt16 mainStageNumberX, UInt16 mainStageNumberY, UInt16 mainStageNumberZ)

Metodos:
    ErrorCode SetAxisNumber(UInt16 mainStageNumberX, UInt16 mainStageNumberY, UInt16 mainStageNumberZ)
    UInt16[] GetAxisNumber()
    ErrorCode MoveAbsolute(Point3D targetPosition)
    ErrorCode MoveAbsolute(Double targetPositionX, Double targetPositionY, Double targetPositionZ)
    ErrorCode MoveAbsolute(Point3D targetPosition, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)
    ErrorCode MoveAbsolute(Double targetPositionX, Double targetPositionY, Double targetPositionZ, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)
    ErrorCode MoveRelative(Point3D targetDistance)
    ErrorCode MoveRelative(Double targetDistanceX, Double targetDistanceY, Double targetDistanceZ)
    ErrorCode MoveRelative(Point3D targetDistance, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)
    ErrorCode MoveRelative(Double targetDistanceX, Double targetDistanceY, Double targetDistanceZ, UInt16 dOutId, Int16 dOutOnDelayTime, Int16 dOutOffDelayTime)
    ErrorCode Stop()
    Point3D GetTargetPosition()
    Point3D GetActualPosition()
    Boolean IsMoving()
    ErrorCode SetSpeed(Double speed)
    ErrorCode SetAccelRate(Double accelRate)
    ErrorCode SetDecelRate(Double decelRate)
    ErrorCode SetStageNumber(UInt16 mainStageNumberX, UInt16 mainStageNumberY, UInt16 mainStageNumberZ)
    ErrorCode SetSubStageNumber(UInt16 subStageNumberX, UInt16 subStageNumberY, UInt16 subStageNumberZ)
    ErrorCode SetRotationCenter(Double rotationOffsetX, Double rotationOffsetY, Double rotationOffsetZ)
    ErrorCode GetErrorCode()
    Status GetStatus()

Tipos anidados/enums:
    SurugaSeiki.Motion.Axis3D+Point3D
    SurugaSeiki.Motion.Axis3D+RotationCenter

=====
SurugaSeiki.Motion.Axis3D+Point3D
=====

Campos:
    Double X
    Double Y
    Double Z

=====
SurugaSeiki.Motion.Axis3D+RotationCenter
=====

Campos:
    UInt16 mainStageNumberX
    UInt16 mainStageNumberY
    UInt16 mainStageNumberZ
    UInt16 subStageNumberX
    UInt16 subStageNumberY
    UInt16 subStageNumberZ
    Double offsetX
```



```
Double offsetY
Double offsetZ
```

B.5 Clase AxisComponents

```
=====
SurugaSeiki.Motion.AxisComponents
=====

Constructores:
    AxisComponents(UInt16 axisNumber)

Metodos:
    ErrorCode MoveAbsolute(Double position)
    ErrorCode MoveRelative(Double distance)
    ErrorCode ReturnOrigin()
    ErrorCode Stop()
    ErrorCode TurnOnServo()
    ErrorCode TurnOffServo()
    ErrorCode ResetError()
    Double GetTargetPosition()
    Double GetActualPosition()
    Boolean IsServoOn()
    Boolean IsServoAlarm()
    Boolean IsMoving()
    Boolean IsOriginSignalOn()
    Boolean IsCwLimitSignalOn()
    Boolean IsCcwLimitSignalOn()
    Boolean IsCwTorqueLimitOn()
    Boolean IsCcwTorqueLimitOn()
    Boolean IsOriginReturnSucceeded()
    ErrorCode SetAccelRate(Double rate)
    ErrorCode SetDecelRate(Double rate)
    ErrorCode SetSineMotion(Boolean sineMotion)
    ErrorCode SetFulcrumSpan(Double span)
    ErrorCode SetEncoderStepLength(Double length)
    ErrorCode SetMaxSpeed(Double speed)
    ErrorCode SetCWTorqueLimit(Double cWlimit)
    ErrorCode SetCCWTorqueLimit(Double cCWlimit)
    ErrorCode GetErrorCode()
    Status GetStatus()

Tipos anidados/enums:
    SurugaSeiki.Motion.AxisComponents+ErrorCode
    SurugaSeiki.Motion.AxisComponents+Status
```

```
=====
SurugaSeiki.Motion.AxisComponents+ErrorCode
=====
```

```
Campos:
    Int32 value__
    static ErrorCode None
    static ErrorCode ServoAlarm
    static ErrorCode ServoOff
    static ErrorCode Moving
    static ErrorCode NotConnected
    static ErrorCode Limit
    static ErrorCode Origin
    static ErrorCode Parameter
    static ErrorCode Torque
```

```
=====
SurugaSeiki.Motion.AxisComponents+Status
=====
```

```
Campos:
    Int32 value__
    static Status ServoAlarm
    static Status ServoOff
    static Status Stopping
    static Status InPosition
    static Status Moving
    static Status NotConnected
    static Status CwLimit
    static Status CcwLimit
    static Status CwTorqueLimit
    static Status CcwTorqueLimit
```

B.6 Clase ErrorLog

```
=====
SurugaSeiki.Motion.ErrorLog
=====
```

B.7 Clase IO

```
=====
SurugaSeiki.Motion.IO
=====

Constructores:
    IO()

Metodos:
    Boolean GetPortState(DigitalIOType iOType, UInt16 id)
    Void SetPortState(UInt16 id, Boolean portState)
    Void SetPulseOutput(UInt16 id, UInt16 delayTime, UInt16 highWidth, UInt16 lowWidth, Int16 repetitionCount)
    Double GetAnalogValue(AnalogIOType iOType, UInt16 id)
    Void SetAnalogValue(UInt16 id, Double setValue)

Campos:
    static Int16 RepetitionCountForever

Tipos anidados/enums:
    SurugaSeiki.Motion.IO+DigitalIOType
    SurugaSeiki.Motion.IO+AnalogIOType

=====
SurugaSeiki.Motion.IO+AnalogIOType
=====

Campos:
    Int32 value_
    static AnalogIOType Input
    static AnalogIOType Output

=====
SurugaSeiki.Motion.IO+DOutControlParameterToAlignmentSystem
=====

=====
SurugaSeiki.Motion.IO+DigitalIOType
=====

Campos:
    Int32 value_
    static DigitalIOType Input
    static DigitalIOType Output
```

B.8 Clase PowerMeter

```
=====
SurugaSeiki.Motion.PowerMeter
=====

Constructores:
    PowerMeter()

Metodos:
    Double GetPower(UInt16 ch)
    AllowedRange GetRange(UInt16 ch)
    Double GetWavelength(UInt16 ch)
    ErrorCode SetRange(UInt16 ch, AllowedRange range)
    ErrorCode SetWaveLength(UInt16 ch, Double waveLength)
    ErrorCode PauseCommunication(UInt16 ch, Boolean isEnabled)

Tipos anidados/enums:
    SurugaSeiki.Motion.PowerMeter+ErrorCode
    SurugaSeiki.Motion.PowerMeter+AllowedRange

=====
SurugaSeiki.Motion.PowerMeter+AllowedRange
=====

Campos:
    Int16 value_
    static AllowedRange Minus60
    static AllowedRange Minus50
    static AllowedRange Minus40
    static AllowedRange Minus30
    static AllowedRange Minus20
    static AllowedRange Minus10
    static AllowedRange Zero
    static AllowedRange Plus10
    static AllowedRange Plus20
    static AllowedRange Auto
    static AllowedRange Invalid

=====
SurugaSeiki.Motion.PowerMeter+ErrorCode
=====

Campos:
    Int32 value_
    static ErrorCode None
    static ErrorCode ChannelOutOfRange
```

```
static ErrorCode Invalid
```

B.9 Clase System

```
=====
SurugaSeiki.Motion.System
=====
```

Propiedades:

```
UInt16 MaxAxisStageNumber (get/set)
UInt16 MaxAnalogInputChNumber (get/set)
UInt16 MaxAlignmentNumber (get/set)
UInt16 MaxAngleAdjustmentNumber (get/set)
UInt16 MaxDInChNumber (get/set)
UInt16 MaxDOutChNumber (get/set)
UInt16 MaxAnalogOutputChNumber (get/set)
UInt16 MaxPowerMeterChNumber (get/set)
System Instance (get)
Boolean Connected (get)
String DllVersion (get)
String SystemVersion (get)
```

Metodos:

```
Boolean IsError()
ErrorCode GetCurrentErrorCode()
Boolean IsEmergencyAsserted()
Void SetAddress(String addr)
Void DisconnectAds()
```

Campos:

```
static UInt16 MaxProfileNumber
static UInt32 ProfileDataPacketMaxDataNumber
```

Tipos anidados/enums:

```
SurugaSeiki.Motion.System+ErrorCode
```

```
=====
SurugaSeiki.Motion.System+AlignmentChParam
=====
```

```
=====
SurugaSeiki.Motion.System+AlignmentCommand
=====
```

Campos:

```
Int32 value__
static AlignmentCommand Null
static AlignmentCommand StartSingle
static AlignmentCommand StartFlat
static AlignmentCommand StartFocus
static AlignmentCommand StartTwoChRotation
static AlignmentCommand StartMMFRotation
static AlignmentCommand Stop
static AlignmentCommand SetSingle
static AlignmentCommand SetFlat
static AlignmentCommand SetFocus
static AlignmentCommand SetTwoChRotation
static AlignmentCommand SetMMFRotation
static AlignmentCommand StartLoopBack
static AlignmentCommand SetLoopBack
```

```
=====
SurugaSeiki.Motion.System+AlignmentMainAxisParam
=====
```

```
=====
SurugaSeiki.Motion.System+AlignmentParam
=====
```

```
=====
SurugaSeiki.Motion.System+AlignmentPowerMeterInfo
=====
```

```
=====
SurugaSeiki.Motion.System+AlignmentStatusInfo
=====
```

```
=====
SurugaSeiki.Motion.System+AnalogOutputControlCommand
=====
```

Campos:

```
Int32 value__
static AnalogOutputControlCommand Null
static AnalogOutputControlCommand SetAnalogOutput
```

```
=====
SurugaSeiki.Motion.System+AngleAdjustmentCommand
=====
```

Campos:

```
Int32 value__
static AngleAdjustmentCommand Null
```

```

static AngleAdjustmentCommand SetParameter
static AngleAdjustmentCommand Start
static AngleAdjustmentCommand Stop

=====
SurugaSeiki.Motion.System+AngleAdjustmentParam
=====

SurugaSeiki.Motion.System+AngleAdjustmentStatusInfo
=====

SurugaSeiki.Motion.System+Axis2DCommand
=====

Campos:
  Int32 value__
  static Axis2DCommand Null
  static Axis2DCommand MoveAbsolute
  static Axis2DCommand MoveRelative
  static Axis2DCommand MoveAbsoluteAngle
  static Axis2DCommand MoveRelativeAngle
  static Axis2DCommand Stop
  static Axis2DCommand SetCompositionSpeed
  static Axis2DCommand SetAccelRate
  static Axis2DCommand SetDecelRate
  static Axis2DCommand SetStageNumber

=====
SurugaSeiki.Motion.System+Axis2DParam
=====

SurugaSeiki.Motion.System+AxisCommandStruct
=====

SurugaSeiki.Motion.System+AxisComponentCommand
=====

Campos:
  Int32 value__
  static AxisComponentCommand Null
  static AxisComponentCommand MoveAbsolute
  static AxisComponentCommand MoveRelative
  static AxisComponentCommand ReturnOrigin
  static AxisComponentCommand Stop
  static AxisComponentCommand TurnOnServo
  static AxisComponentCommand TurnOffServo
  static AxisComponentCommand ResetError
  static AxisComponentCommand SetMaxSpeed
  static AxisComponentCommand SetAccelRate
  static AxisComponentCommand SetDecelRate
  static AxisComponentCommand SetSineMotion
  static AxisComponentCommand SetFulcrumSpan
  static AxisComponentCommand SetEncoderStepLength
  static AxisComponentCommand SetCWTorquelimit
  static AxisComponentCommand SetCCWTorquelimit

=====
SurugaSeiki.Motion.System+AxisControlType
=====

Campos:
  Int32 value__
  static AxisControlType AxisComponents
  static AxisControlType Axis2D
  static AxisControlType Axis3D

=====
SurugaSeiki.Motion.System+AxisMethod
=====

Campos:
  Int32 value__
  static AxisMethod Null
  static AxisMethod MoveAbsolute
  static AxisMethod MoveRelative
  static AxisMethod MoveAbsoluteAngle
  static AxisMethod MoveRelativeAngle
  static AxisMethod Stop
  static AxisMethod SetCompositionSpeed
  static AxisMethod SetAccelRate
  static AxisMethod SetDecelRate
  static AxisMethod SetStageNumber
  static AxisMethod SetSubStageNumber
  static AxisMethod SetRotationCenter
  static AxisMethod SetFixedAxisOffset

=====
SurugaSeiki.Motion.System+AxisStatus
=====

SurugaSeiki.Motion.System+DOutControlCommand
=====

Campos:

```

```

    Int32 value_
    static DOutControlCommand Null
    static DOutControlCommand SetDout
    static DOutControlCommand SetPulseOutput

=====
SurugaSeiki.Motion.System+DeviceControlCommand
=====

Campos:
    Int32 value_
    static DeviceControlCommand Null
    static DeviceControlCommand SetWaveLength

=====
SurugaSeiki.Motion.System+DeviceStatusMap
=====

=====
SurugaSeiki.Motion.System+ErrorCode
=====

Campos:
    Int32 value_
    static ErrorCode NoError
    static ErrorCode ConnectionLost
    static ErrorCode VersionError
    static ErrorCode MaxNumberOfErrorCode

=====
SurugaSeiki.Motion.System+Point2d
=====

=====
SurugaSeiki.Motion.System+PowerMeterControlCommand
=====

Campos:
    Int32 value_
    static PowerMeterControlCommand None
    static PowerMeterControlCommand SetRange
    static PowerMeterControlCommand SetWaveLength
    static PowerMeterControlCommand SetCommunicationPaused

=====
SurugaSeiki.Motion.System+ProfileCommand
=====

Campos:
    Int32 value_
    static ProfileCommand Null
    static ProfileCommand SetParameter
    static ProfileCommand Start
    static ProfileCommand Stop

=====
SurugaSeiki.Motion.System+ProfileParam
=====

=====
SurugaSeiki.Motion.System+RotationCenterParam
=====

=====
SurugaSeiki.Motion.System+SystemInfo
=====

```

Bibliography